



دفتريچه راهنما
ماساژور دستی
RT-1052



RT-1052
USER MANUAL

ما اغلب در دنیای پرمشغله امروز دچار استرس زیادی هستیم و حفظ سلامتی در حال گذار از یک کلمه رایج به یک جنبش تمام عیار است.

این ماساژور دستی که مجهز به یک موتور قدرتمند و مکانیزم ضربه طولانی با فرکانس بالا است، می‌تواند ماساژ کوبه‌ای مؤثری را برای هدف قرار دادن تنش و درد عضلانی و تسهیل ریکاوری ورزشی اعمال کند. این ماساژور دستی سبک، بی‌صدا، قابل شارژ، بی‌سیم، با سری‌های ماساژ متعدد و فرکانس‌های مختلف، که برای ریلکسیشن عضلات طراحی شده است، ماساژور شخصی ایده‌آل شما پس از تمرین است. از شما بابت خرید این محصول سپاسگزاریم. لطفاً قبل از استفاده، این دفترچه راهنمای کاربر را به دقت مطالعه کنید تا از نصب و عملکرد صحیح اطمینان حاصل شود.







لطفاً این دفترچه راهنمای کاربر را به درستی برای مراجعات بعدی نگهداری کنید.

فهرست مطالب

۱	اقدامات احتیاطی ایمنی
۳	نام و عملکرد هر جزء
۳	ساختار
۳	سری‌های ماساژ
۴	پنل کنترل
۴	راهنمای کاربر پنل کنترل
۵	روش‌های نصب
۶	راهنمای عملیات (کارکرد)
۶	بررسی‌های اولیه
۶	راهنمای کارکرد
۶	پس از استفاده
۷	مراقبت و نگهداری
۷	دستورالعمل‌های مراقبت
۷	نکات گرم (احتیاطی)
۸	عیب‌یابی
۸	مشخصات محصول

اقدامات احتیاطی ایمنی

- قبل از استفاده، تمام هشدارها را با دقت بخوانید.
- اقدامات احتیاطی و هشدارهای ذکر شده در زیر به اطمینان از عملکرد صحیح این دستگاه کمک می کند.
- دسته بندی حوادث ناشی از استفاده نادرست به "هشدار جدی" (WARNING) و "احتیاط" (CAUTION) طبقه بندی می شوند.
- تمام هشدارهای جدی و احتیاط های زیر را بخوانید و تمام دستورالعمل های این دفترچه راهنما را دنبال کنید.

 WARNING	هشدار جدی. عملکرد نامناسب ممکن است باعث آسیب به کاربران شود.
 CAUTION	احتیاط. عملکرد نامناسب ممکن است باعث آسیب به کاربران یا آسیب به محصول شود.
	ممنوع.  نماد سمت راست نشان می دهد که جداسازی قطعات مجاز نیست.
	اجباری.  نماد سمت راست نشان می دهد که سیم برق باید پس از استفاده از پریز جدا شود.

هشدار جدی

نظارت دقیق هنگامی که این محصول توسط کودکان، افراد ناتوان، یا افراد معلول یا در نزدیکی آنها استفاده می شود، ضروری است.

<p>ما توصیه می کنیم کسانی که هر یک از شرایط زیر را دارند، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت کنند.</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱. کسانی که ضربان ساز (pacemaker) یا دستگاه های الکترونیکی کاشته شده در بدن دارند. ۲. کسانی که تحت درمان پزشکان هستند، به ویژه کسانی که احساس ناراحتی می کنند. ۳. کسانی که تومورهای بدخیم یا آبسه های بدخیم دارند. ۴. کسانی که بیماری های جدی یا جراحات پوستی دارند. ۵. زنانی که باردار هستند یا در دوران قاعدگی قرار دارند. ۶. کسانی که پوکی استخوان یا شکستگی ستون فقرات دارند. ۷. کسانی که تب بالا دارند. 	
<p>نظارت دقیق هنگامی که این محصول توسط کودکان، افراد ناتوان، یا افراد معلول یا در نزدیکی آنها استفاده می شود، ضروری است. به کودکان اجازه ندهید از این محصول استفاده کنند یا با آن بازی کنند.</p> <p>استفاده از ماساژور دستی روی نواحی سر، گردن یا قلب می تواند کشنده باشد.</p> <p>تحت نظارت پزشک، می توانید از ماساژور دستی بر روی ستون فقرات گردنی یا ستون فقرات پشت استفاده کنید.</p> <p>اگر سیم برق آسیب دیده است، فوراً دستگاه را خاموش کنید و از محصول استفاده نکنید.</p> <p>اطمینان حاصل کنید که آب یا مایعات دیگر وارد محصول نشود تا از نقص جلوگیری شود؛ اگر دستگاه در آب یا مایعات دیگر افتاد، از آن استفاده نکنید و سعی نکنید خودتان آن را از هم باز کرده یا تعمیر کنید، لطفاً آن را به مرکز خدمات مجاز بفرستید.</p> <p>برای جلوگیری از آسیب به کاربران یا آسیب به محصول، انگشتان، مو یا سایر قسمت های بدن خود را نزدیک شفت کوبه ای (ضربه زننده) قرار ندهید.</p>	
<p>بدون اجازه، اقدام به تعمیر یا جداسازی دستگاه نکنید. لطفاً با نمایندگی مجاز یا عامل خدمات تماس بگیرید.</p>	



اجباری

توصیه می‌کنیم دستگاه را به صورت مداوم فقط به مدت ۱۰ دقیقه استفاده کنید. اجسام سنگین را روی دستگاه قرار ندهید و کنترل‌ها را با دست خیس استفاده نکنید. دستگاه را مستقیماً روی نواحی استخوانی استفاده نکنید؛ ضربات شدید ممکن است باعث کبودی شود. سطح شدت مناسب را انتخاب کنید. در هنگام استفاده، دستگاه را با پتویا بالش نپوشانید تا از داغ شدن بیش از حد و آسیب جلوگیری شود. هیچ شیئی نباید در چیه هوا را مسدود کند تا قطعات داخلی داغ نشوند. اجازه ندهید هنگام کارکردن دستگاه، چیزی وارد آن شود. برای تمیز کردن، دستگاه را در آب یا هر نوع محلول دیگر فرو نکنید. اگر دستگاه از محیط سرد به محیط گرم منتقل شد، صبر کنید تا رطوبت باقی مانده خشک شود و سپس آن را پاک کنید تا از آسیب جلوگیری شود. انواع مختلف باتری را با هم استفاده نکنید؛ ممکن است دستگاه آسیب ببیند یا باتری نشت کند یا آتش بگیرد. دستگاه را روی سطح سخت نیندازید و به صورت نادرست از آن استفاده نکنید. از این دستگاه همراه با دستگاه‌های درمانی دیگر استفاده نکنید. در صورت قطع برق، دوشاخه را از پریز بکشید و همه کلیدها را خاموش کنید. اگر هنگام استفاده هرگونه علائم غیرعادی مشاهده کردید، فوراً دستگاه را خاموش کنید و از آن استفاده نکنید. اگر سیم برق آسیب دید، باید توسط سازنده، خدمات پس از فروش یا فرد متخصص تعویض شود. برای جلوگیری از نشتی برق، دستگاه را در محیط مرطوب استفاده نکنید. اگر هنگام کار کردن دستگاه احساس ناراحتی کردید، فوراً دستگاه را خاموش کرده و استفاده نکنید. پس از استفاده، سری ماساژ را جدا کرده و دستگاه را در جای امن نگهداری کنید.





ممنوع

بلافاصله بعد از غذا از دستگاه استفاده نکنید؛ ممکن است باعث ناراحتی شود. در حالت مصرف الکل از دستگاه استفاده نکنید. در هنگام رعد و برق یا قبل از نصب یا برداشتن قطعات، دوشاخه را از پریز خارج کنید. برای تمیز کردن از بنزین، تینر، روغن موز یا حشره‌کش استفاده نکنید. در دمای بالاتر از ۴۰ درجه از دستگاه استفاده نکنید و آن را از منابع گرما دور نگه دارید. در دمای کمتر از ۵ درجه از دستگاه استفاده نکنید؛ روان‌کننده‌ها سفت شده و اصطکاک افزایش می‌یابد. برای حفظ عمر باتری، دستگاه را در دمای زیر صفر شارژ نکنید. هنگام استفاده از دستگاه سیگار نکشید تا از آتش‌سوزی جلوگیری شود.


نام و عملکرد اجزای دستگاه

ساختار

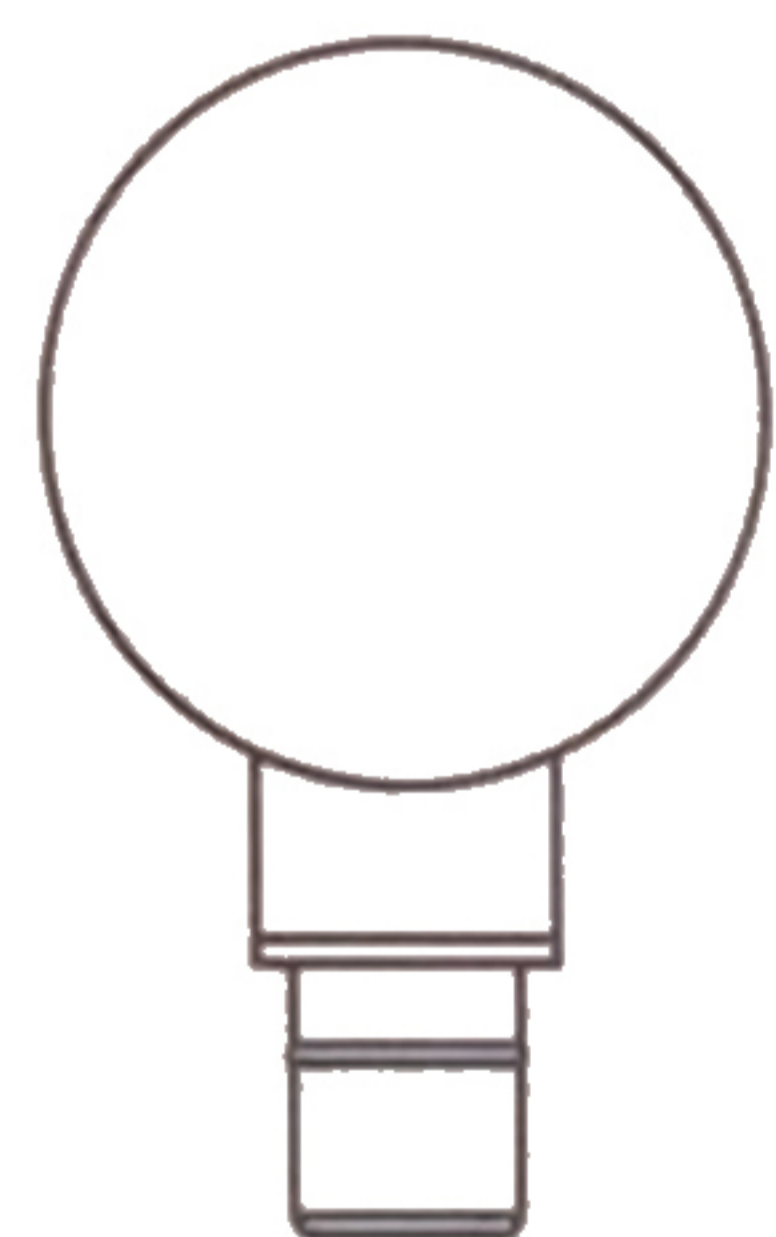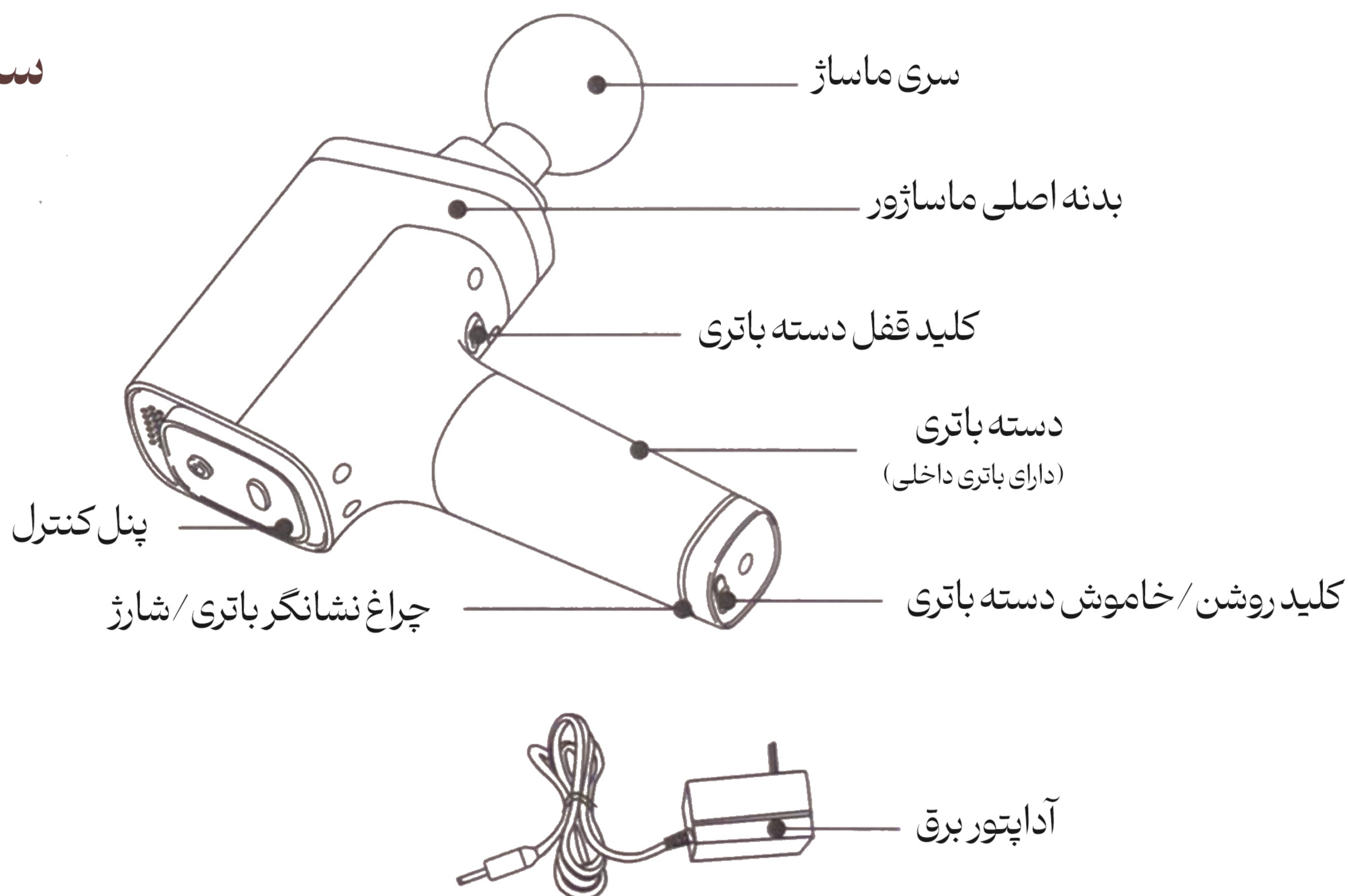

سری گرد

مناسب برای گروه عضلانی بزرگ

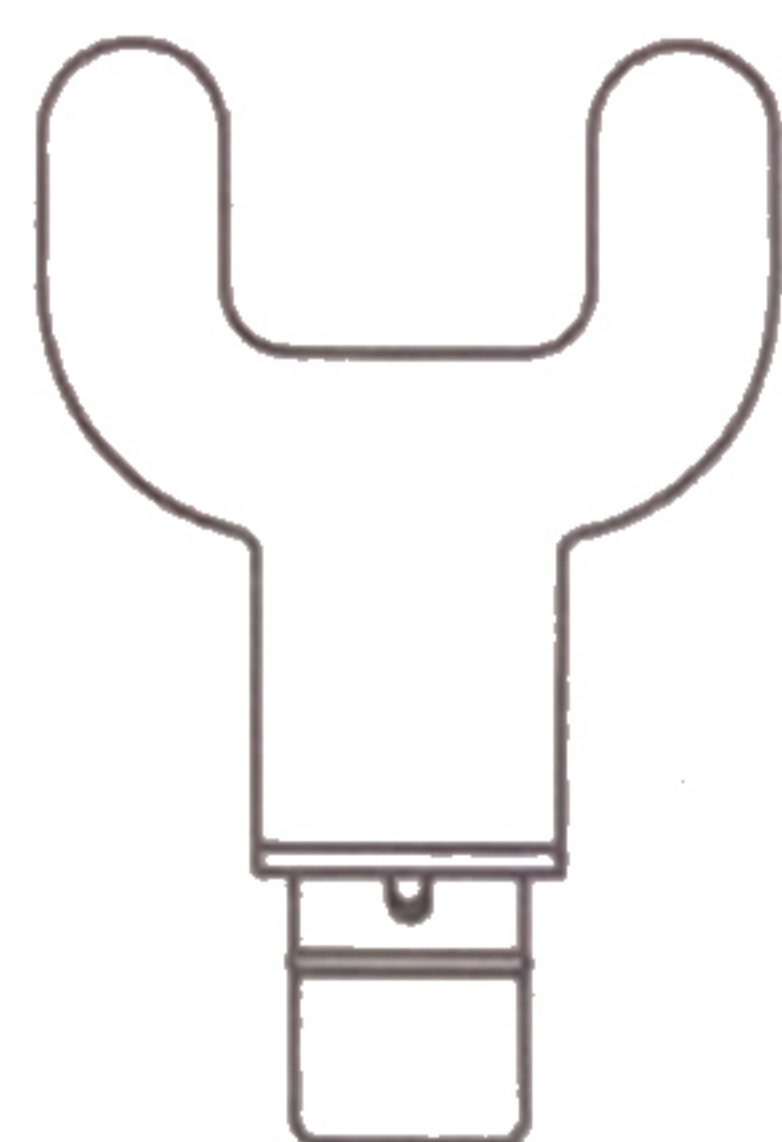


سری دوشاخه

برای ستون فقرات



سری پلاگ گاز

مناسب برای تمام بخش های بدن

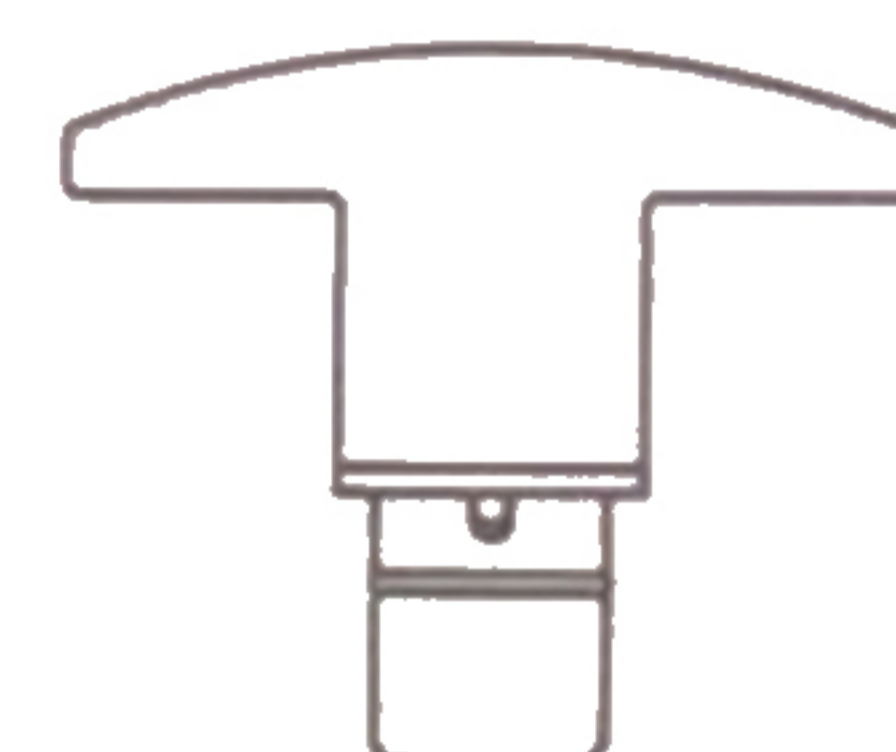


سری کف دست

مناسب برای شکم و کمر



سری گلوله ای

مناسب برای مفاصل، عضلات عمقی و نقاط ماشه ای

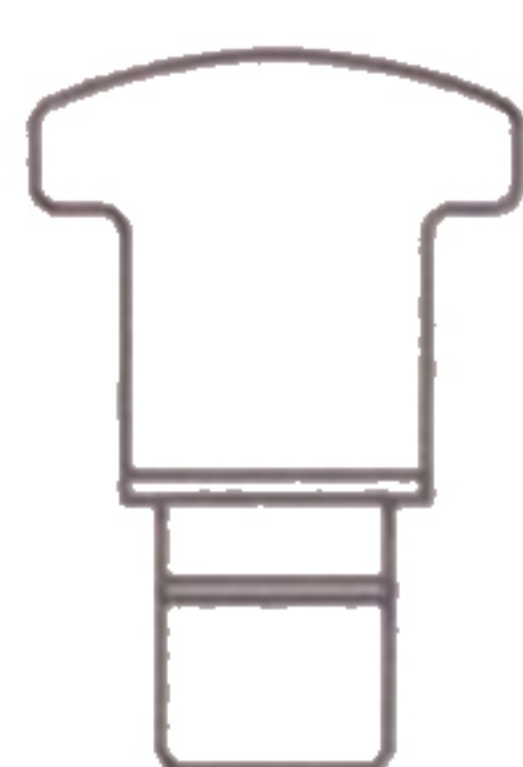

سری صاف


مناسب برای دست و پا و شانیه ها

هشدار اضافی

اجسام سنگین را روی دستگاه قرار ندهید.
هیچ وقت روی دستگاه ننشینید یا نایستید.
در زمان عدم استفاده، دستگاه را خاموش کرده و در جای امن نگهداری کنید تا کودکان نتوانند آن را روشن کنند.

نام و عملکرد اجزای دستگاه

پنل کنترل

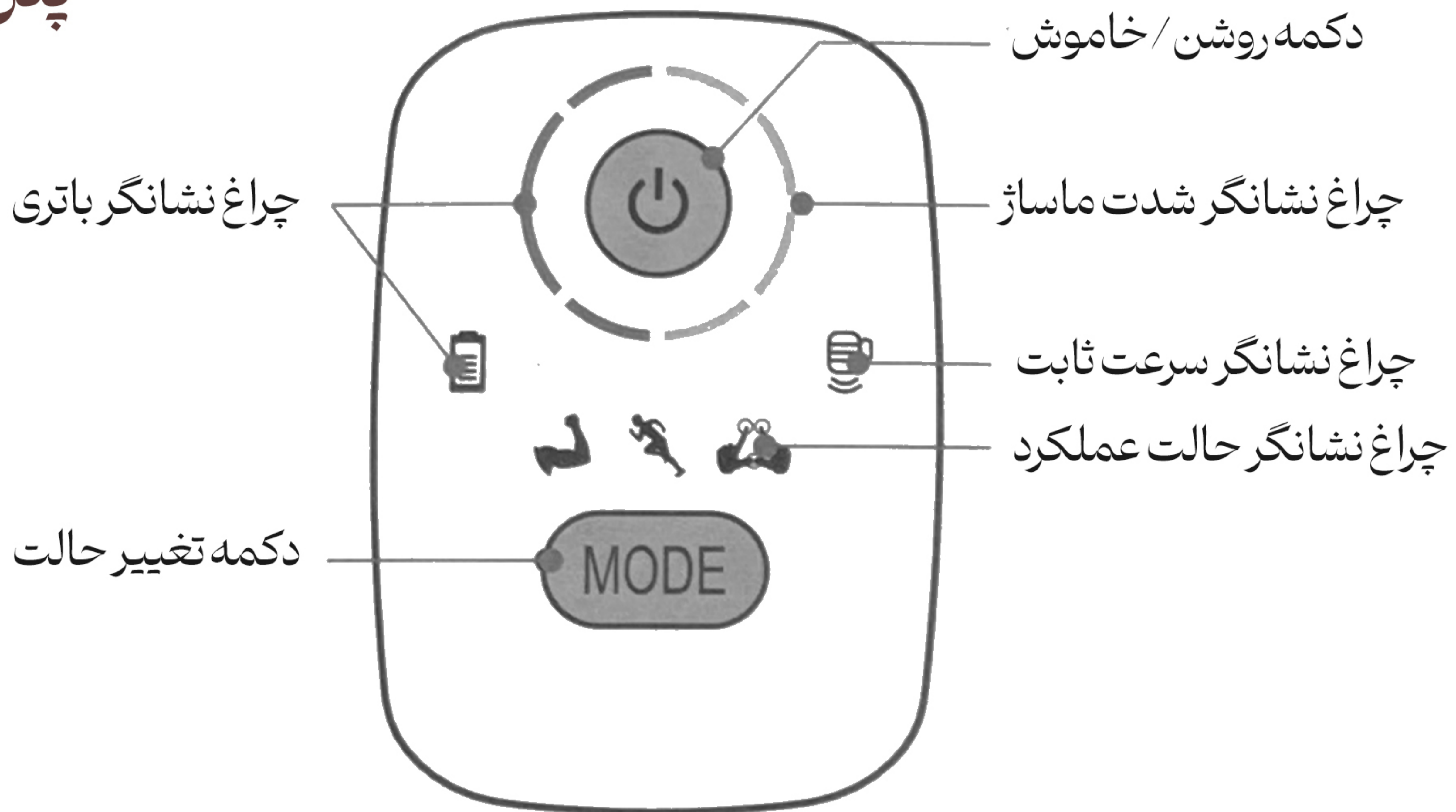

راهنمای استفاده از پنل کنترل

روشن / خاموش



برای روشن کردن دستگاه، دکمه پاور را فشار دهید؛ دستگاه در حالت شدت پایین شروع به کار می کند. با زدن دوباره دکمه، شدت ماساژ به سطح بالاتر تغییر می کند (از سطح ۱ تا ۴). برای خاموش کردن دستگاه، دکمه پاور را ۲ ثانیه نگه دارید.

دکمه تغییر حالت



وقتی دستگاه روشن است، با فشردن دکمه Mode بین حالت های مختلف ماساژ جابه جا شوید. با یک فشار کوتاه روی دکمه پاور، دستگاه به حالت ماساژ با سرعت ثابت می رود.

چراغ وضعیت باتری

چراغ وضعیت باتری (۴ نوار در سمت چپ دکمه پاور): وقتی باتری کاملاً پر باشد هر ۴ نوار روشن می شوند. وقتی باتری کم باشد چراغ شروع به چشمک زدن می کند (نیاز به شارژ).

چراغ شدت سرعت

چراغ شدت سرعت (۴ نوار در سمت راست دکمه پاور): هرچه نوارهای بیشتری روشن شوند، شدت ماساژ بیشتر است.

چراغ سرعت ثابت


وقتی دستگاه در حالت سرعت ثابت کار کند، این چراغ روشن می ماند.

نام و عملکرد اجزای دستگاه

هشدار

- دستگاه به صورت پیش فرض ۱۰ دقیقه کار می کند و سپس به طور خودکار خاموش می شود. برای روشن کردن دوباره، دکمه پاور را بزنید.
- دستگاه را پشت سرهم روشن و خاموش نکنید؛ قبل از روشن کردن دوباره ۳ ثانیه صبر کنید.
- وقتی دستگاه روشن است، هیچ گاه دست خود را داخل ورودی ها نکنید.
- کودکان و حیوانات خانگی را از دستگاه دور نگه دارید.
- روی پنل کنترل آب یا مایع دیگری نریزید.
- دستگاه را از سیم برق بلند نکنید و از سیم به عنوان دسته استفاده نکنید.

روش نصب

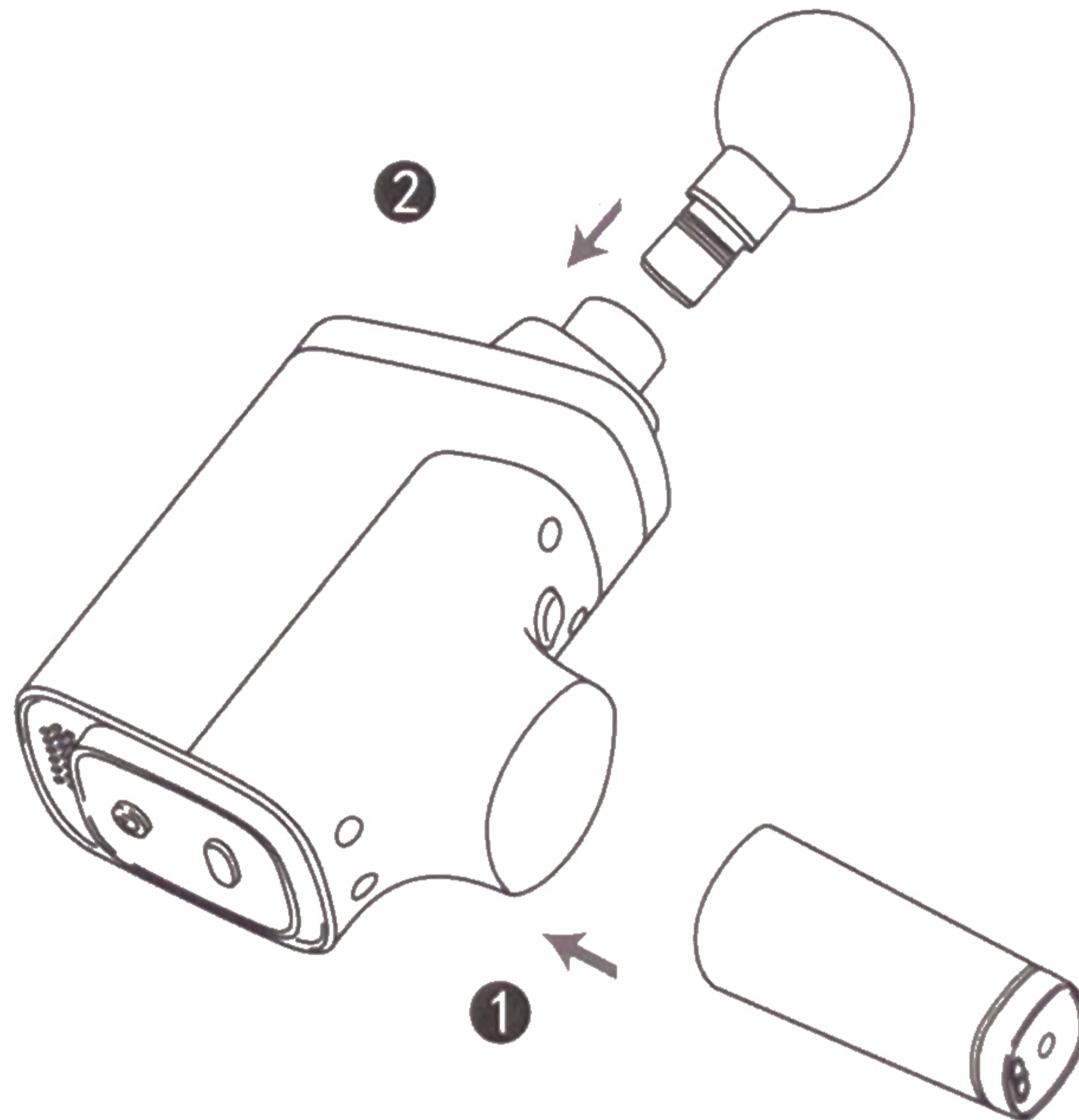

دسته باتری را در محل مخصوص قرار دهید و مطمئن شوید که تا جای قفل شدن کامل به داخل رفته باشد. برای اطمینان از محکم بودن، دسته را کمی بکشید. برای نصب سری ماساژ، دستگاه را خاموش کنید. برآمدگی سری ماساژ را با شیار دستگاه هم تراز کنید و به آرامی وارد کنید تا کامل جا بیفتد.


قبل از شروع، مطمئن شوید دسته باتری و سری ماساژ به درستی نصب و قفل شده اند. برای جدا کردن دسته باتری، کلید قفل دسته را فشار دهید و آن را بیرون بکشید.



راهنمای کاربری

بررسی های اولیه

قبل از استفاده، دستگاه را با دقت بررسی کنید.
 برای اولین استفاده، دسته باتری را به مدت ۶ ساعت شارژ کنید تا مطمئن شوید کاملاً پر است. می توانید دسته باتری را چه روی دستگاه باشد و چه جدا شده باشد، شارژ کنید.
 آداپتور ۲۶ ولتی را به پورت شارژ دسته باتری وصل کرده و سپس دوشاخه را در پریز ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت قرار دهید.
 چراغ نشانگر اطراف دسته باتری هنگام شارژ به حالت چشمک زن درمی آید. رنگ چراغ وضعیت باتری را نشان می دهد: قرمز چشمک زن یعنی باتری کم است، زرد چشمک زن یعنی باتری متوسط است، سبز چشمک زن یعنی باتری زیاد است، سبز ثابت یعنی باتری کاملاً شارژ شده است.

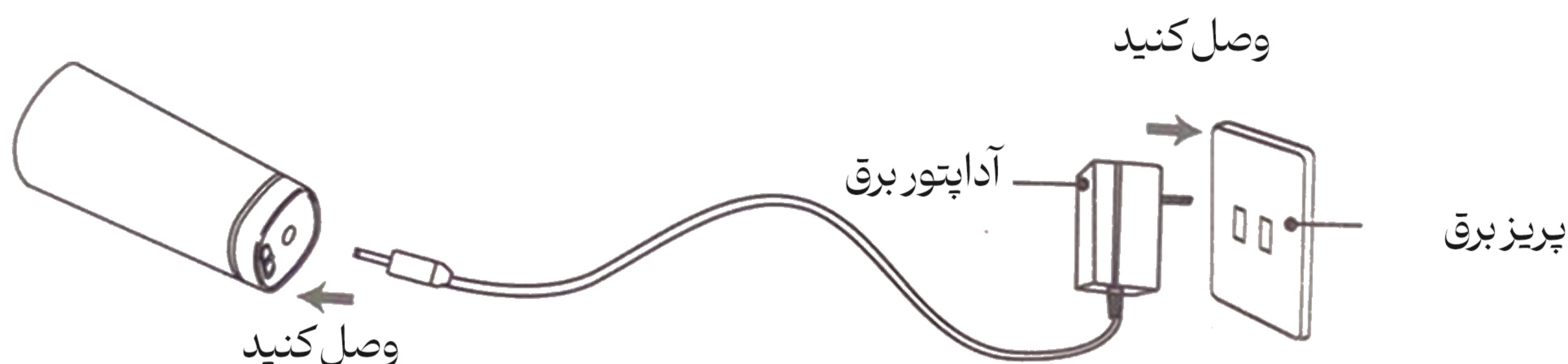

این ماساژور دستی هنگام شارژ شدن روشن نمی شود و کار نمی کند.
 این محصول دارای سیستم های ایمنی برای جلوگیری از جریان بیش از حد، شارژ بیش از حد و داغ کردن است.
 در دمای پایین، میزان شارژ کنترل می شود تا سلامت باتری حفظ شود.
 برای حفظ طولانی مدت عمر باتری، سطح شارژ آن را بالاتر از ۵۰٪ نگه دارید.
 قبل از اتصال به برق، مطمئن شوید سیم برق آسیب ندیده باشد.



هشدار

پس از شارژ کامل باتری، دسته باتری را به دستگاه وصل کنید.

راهنمای استفاده

کلید عملکرد دسته باتری را در وضعیت «روشن» قرار دهید.
 برای روشن کردن دستگاه، دکمه پاور را روی پنل کنترل فشار دهید.

هشدار هرگز دستگاه را به سمت صورت نگیرید.



پس از استفاده برای خاموش کردن دستگاه، دکمه پاور را ۲ ثانیه نگه دارید.
 پس از استفاده، دستگاه را در جای مناسب نگهداری کنید تا خطر احتمالی ایجاد نشود.

این دستگاه مجهز به سیستم محافظت در برابر داغ شدن است؛ استفاده مداوم ممکن است باعث شود سیستم محافظتی برای جلوگیری از آسیب، دستگاه را خاموش کند. پس از خنک شدن، دوباره روشن کنید.



هشدار

مراقبت و نگهداری

تمیزکاری

قبل از تمیز کردن، حتماً دوشاخه را از پریز جدا کنید.
برای تمیز کردن سطح دستگاه از یک پارچه نرم استفاده کنید.
برای لکه‌ها، پارچه نرم آغشته به آب یا مواد شوینده ملایم را استفاده کرده و سپس با پارچه خشک کنید.

هرگز با دست خیس دوشاخه را وصل یا جدا نکنید.

هرگز دستگاه را با آب نشوید و هیچ مایعی داخل آن نریزید.

از بنزین، تینر یا سایر حلال‌ها برای تمیز کردن استفاده نکنید؛ ممکن است دستگاه آسیب ببیند یا رنگ آن کمرنگ شود.



هشدار

نگهداری

دستگاه را در محیطی دور از رطوبت، دمای بالا و گازهای فرّار قرار دهید.
اگر قرار است مدت طولانی از دستگاه استفاده نکنید، توصیه می‌شود دسته باتری را جدا کرده و کاملاً شارژ کنید و دستگاه را در جعبه قرار دهید تا از گردوغبار محافظت شود.
در صورت عدم استفاده طولانی مدت، توصیه می‌شود دسته باتری هر دو ماه یک بار شارژ شود تا آسیب نبیند.

هشدار دستگاه را برای مدت طولانی زیر نور مستقیم خورشید قرار ندهید؛ ممکن است باعث آسیب یا تغییر رنگ شود.



نکات مهم

در استفاده روزانه، موارد زیر را بررسی کنید:
بوی سوختگی.
در صورت لمس سیم برق، دستگاه به شکل غیرعادی خاموش/روشن می‌شود.
داغ شدن سیم برق.
سایر علائم غیرعادی.

در صورت مشاهده هر یک از علائم بالا، برای جلوگیری از خرابی یا حادثه، استفاده از دستگاه را متوقف کنید.
دکمه پاور را خاموش کرده و دوشاخه را از برق بکشید؛ برای تعمیر با نمایندگی یا فروشنده تماس بگیرید.
بدون مجوز، دستگاه را تعمیر یا باز نکنید.



هشدار

عیب‌یابی

علائم:	علت‌های احتمالی:	راه حل:
در هنگام کار صدا شنیده می‌شود.	این صدا طبیعی است و به دلیل حرکت قطعات مکانیکی داخلی ایجاد می‌شود.	نیازی به انجام هیچ اقدامی نیست.
دستگاه روشن نمی‌شود.	باتری به درستی وصل نشده است. باتری شارژ ندارد. دستگاه در حالت محافظت از اضافه بار قرار گرفته است.	باتری را صحیح متصل کنید و مطمئن شوید کلید روی حالت ON باشد. باتری را شارژ کنید. ۱۵ دقیقه صبر کنید تا خنک شود، سپس دوباره روشن کنید.
ماساژور دستی هنگام کار ناگهان متوقف می‌شود.	باتری کم است. زمان کارکرد مجاز موتور تمام شده است.	باتری را شارژ کرده و دوباره روشن کنید. دکمه پاور را پس از ۱۵ دقیقه دوباره فشار دهید.
چراغ LED باتری روشن نمی‌شود.	کلید باتری روی حالت ON نیست. باتری مدت طولانی بدون استفاده مانده و کاملاً تخلیه شده است.	کلید را روی ON بگذارید. باتری را شارژ کنید یا در صورت خراب بودن، تعویض نمایید.
در حین کار دود، بوی سوختگی یا بوی غیرعادی احساس می‌شود.	دستگاه معیوب است.	فوراً دستگاه را خاموش کرده و به مرکز خدمات مجاز ارسال کنید.
طول عمر باتری کم شده یا دستگاه شارژ نمی‌شود.	باتری فرسوده شده و عمر آن به پایان رسیده است.	باتری را با نمونه جدید تعویض کنید.

نام محصول: ماساژور دستی

شماره مدل: RT1052

ولتاژ نامی: ۲۶ ولت