

صندلی ماساژور GLS-541

دفترچه راهنما



مشتری گرامی از اینکه این محصول را انتخاب کردید از شما تشکر می نمایم، پیش از استفاده از صندلی دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید و بمنظور عملکرد بهتر و استفاده مناسب تر توجه ویژه ای به اقدامات ایمنی ذکر شده داشته باشید.

فهرست:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| - روشن ساختن دستگاه | - اقدامات ایمنی |
| - وضعیت نصب | - نام و عملکرد هر یک از اجزا |
| - نگهداری | - ساختار بیرونی |
| - فعال کردن سندلی ماساژ | - ساختار درونی |
| - پیش از نشستن بر روی سندلی | - جعبه ی برق |
| - بلوتوث | - کنترل |
| - پس از استفاده | - دستورالعمل کنترل |
| - محیط اطراف سندلی | - اقدامات پیش از استفاده |
| - مستقر سازی سندلی | - روش نصب |
| - نگهداری و مراقبت از سندلی | - روش جا به جایی |
| - مشکل یابی و ویژگی های تکنیکی | |



اقدامات ایمنی:

پیش از استفاده از دستگاه اقدامات ایمنی ذکر شده را به دقت مورد مطالعه قرار دهید تا به شکل صحیح از دستگاه استفاده نمایید.

خطر و آسیب وارده به صندلی ماساژور به دلیل عدم استفاده صحیح به دو دسته هشدار و احتیاط تقسیم می شود. توصیه میشود علائم نشان داده شده را به دقت رعایت کنید. استفاده نادرست ممکن است موجب صدمه به کاربر و آسیب به دستگاه شود.

ممنوعیت در عملکرد: که توسط این علامت نشان داده میشود و نشان دهنده ی سوار کردن نادرست اجزای صندلی است.



اجبار در عملکرد: که توسط این علامت نشان داده میشود که نشانگر اتصال نامناسب دوشاخه ی برق دستگاه است.



هشدار

توصیه میشود افرادی با شرایط زیر پیش از استفاده با پزشک خود مشورت کنند:

- ۱) افرادی که در بدنشان دستگاه الکتریکی جاسازی شده مانند ضربان قلب ساز.
- ۲) افرادی که تحت درمان پزشک هستند به ویژه کسانی که کسالت دارند.
- ۳) افرادی که تومورهای بدخیم ، نارحتی قلبی یا مشکلات حاد دارند.
- ۴) خانم های باردار یا خانم هایی که در دوران قاعدگی هستند.
- ۵) افرادی که مشکلات پوستی داشته و یا دچار آسیب دیدگی پوستی هستند.
- ۶) افرادی که دمای بدنشان بالای ۳۸ درجه است (حالت تب).



- ۱) اجازه ندهید افراد ناتوان ذهنی صندلی را به تنهایی استفاده کنند (با نظارت مشکلی پیش نخواهد آمد)
- ۲) به کودکان اجازه بازی بر روی صندلی را ندهید.
- ۳) اجازه ندهید بیش از یک نفر در یک نوبت از صندلی استفاده کند.
- ۴) اگر سیم برق یا دوشاخه دستگاه آسیب دید فوراً با مرکز خدمات دستگاه برای رفع عیب دستگاه تماس بگیرید.
- ۵) هیچگاه سیم برق دستگاه را زیاد خم نکنید و یا با پا به آن فشار وارد نکنید ، نچرخانید و آن را گره نزنید.
- ۶) به خردسالان اجازه استفاده از دستگاه را ندهید.





به افرادی جز تکنسین خاص شرکت اجازه نصب ، راه اندازی ، یا جا به جایی و تعمیر صندلی ماساژور راندهید و در صورت بروز مشکل با دفتر مرکزی و مرکز خدمات تماس بگیرید.



احتیاط

۱) بیش از ۲۰ دقیقه به صورت پیوسته از صندلی ماساژور استفاده نکنید و برای ماساژ قسمت خاصی از بدن ۵ دقیقه از صندلی استفاده نمایید.

۲) صندلی را بر روی سطح صاف قرار دهید.

۳) زمان تنظیم قسمت پایی و پشتی صندلی از فشار مضاعف اجتناب کنید همچنین دستگاه را در دسترس کودکان و حیوانات خانگی قرار ندهید.

۴) دقت داشته باشید از منبع الکتریکی که بیشتر از ولتاژ ویژه دستگاه می باشد به هیچ وجه استفاده نشود چرا که ممکن است موجب آتش سوزی و آسیب جدی به صندلی ماساژور شود.

۵) پیش از استفاده لطفاً بالشتک صندلی را بردارید تا از سالم بودن پارچه ماساژور قسمت پشت اطمینان حاصل نمایید ، در صورت مواجه با مشکل فوراً با مرکز خدمات تماس حاصل نمایید .

۶) به هیچ عنوان با دستان مرطوب با کنترل دستگاه کار نکنید و اجسام سنگین را روی آن قرار ندهید.

۷) تنها افراد زیر ۱۲۰ کیلو گرم می توانند از این دستگاه استفاده کنند.

۸) لطفاً بطور همزمان از دیگر ابزار درمانی به همراه این دستگاه استفاده نکنید.

۹) در زمان استفاده اگر احساس ناخوشایندی داشتید فوراً دستگاه را متوقف سازید و با پزشک مشورت کنید.


۱۰) صندلی فوق مجهز به سیستم گرمایشی بوده لذا افرادی که به گرما حساس هستند باید با دقت از این دستگاه استفاده نمایند.


۱۱) قبل از پاکسازی صندلی و بعد از استفاده صندلی را به طور کامل خاموش نموده و دو شاخه را از برق خارج نمایید.



اجبار




<p>(۱) به منظور جلوگیری از ایجاد احساس نامطلوب پس از صرف وعده های غذایی از سندلی استفاده نکنید.</p> <p>(۲) توجه داشته باید هنگام استفاده از سندلی در خواب فرو نروید.</p> <p>(۳) هنگامی که احساس خوبی ندارید از سندلی استفاده نکنید.</p> <p>(۴) اگر رویه ی سندلی کثیف شد تنها از پاک کننده ی شناخته شده با کیفیت استفاده کنید و از پاک کننده های شیمیایی یا بنزین استفاده نکنید و حشره کش بر روی دستگاه اسپری نکنید .</p> <p>(۵) به منظور جلوگیری از صدمه و خرابی دستگاه از نشستن بر روی قسمت پشت و پایی و یا دستی خودداری نمایید .</p> <p>(۶) لطفاً هنگام استفاده از سندلی ماساژور سیگار نکشید.</p>	 <p>PROHIBITED</p> <p>ممنوعیت</p>
---	--

<p>(۱) به منظور جلوگیری از آسیب به سندلی لطفاً بعد از استفاده از دستگاه دو شاخه دستگاه را از برق خرج نمایید لذا به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی به هیچ عنوان دوشاخه برق را با دست خیس متصل و خارج نکنید</p>	 <p>ممنوع</p>
--	--






ساختار بیرونی

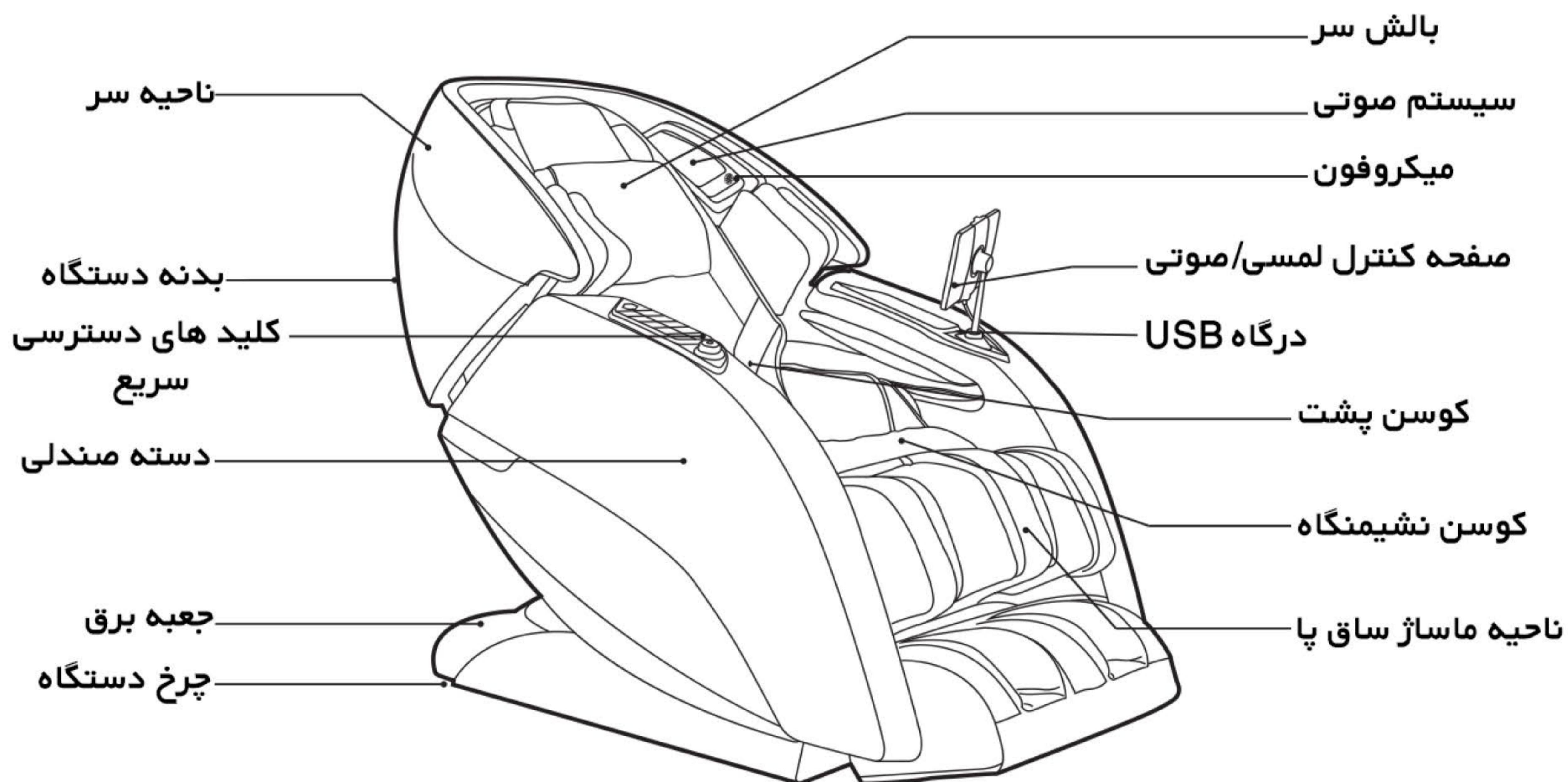


ساختار درونی

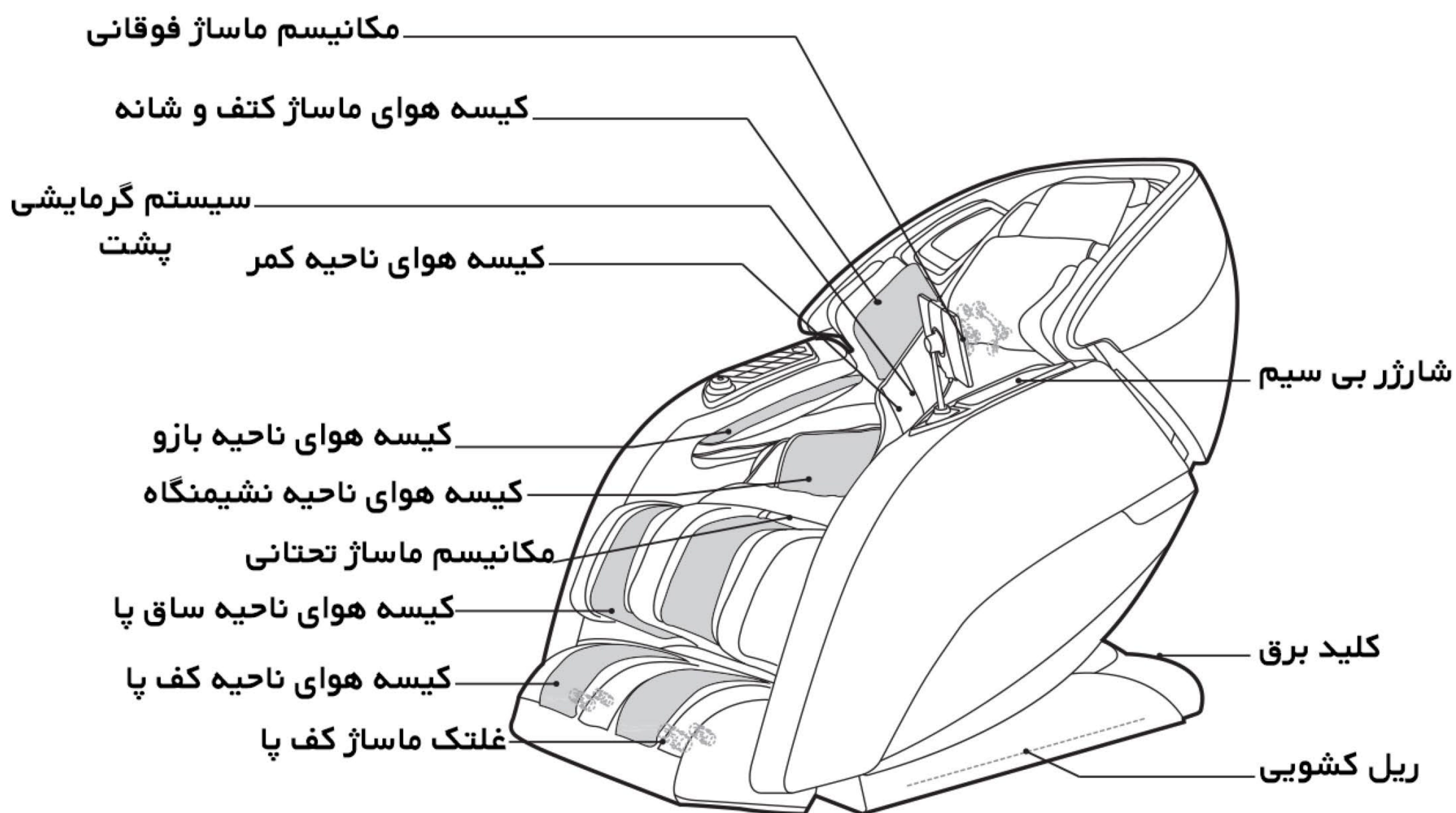



کنترل دستگاه

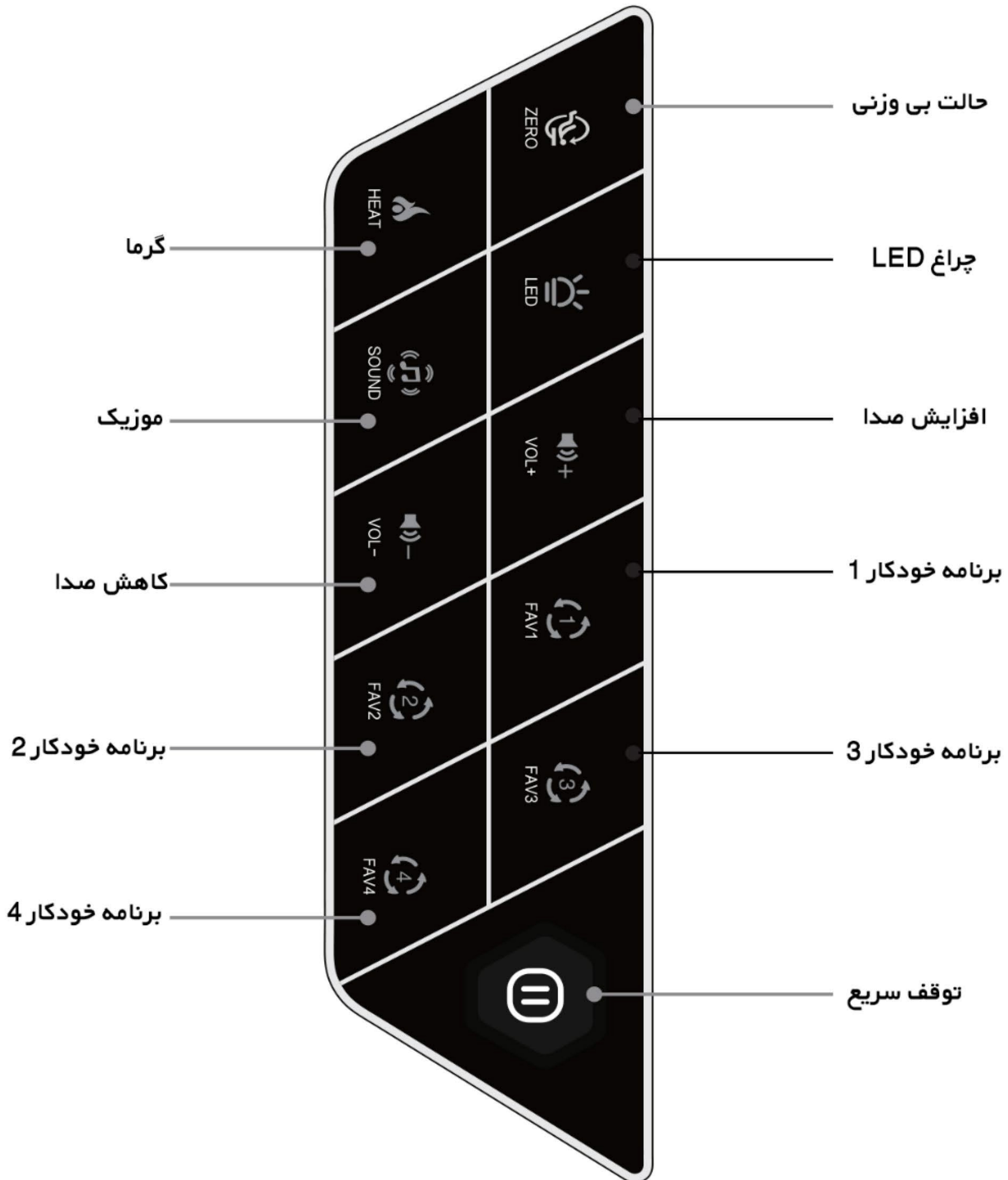



احتیاط

در صورت بروز سانحه برای جعبه برق به کودکان اجازه نزدیک شدن به صندلی را ندهید.
لطفاً پس از اتمام ماساژ صندلی را خاموش کنید و سیم برق صندلی را از فیش برق جدا سازید.
در صورت عدم استفاده از صندلی در طولانی مدت آن را در انبار نگهداری کنید.

دستورالعمل دکمه های کنترل



موقعیت بی وزنی (جاذبه صفر):

این کلید را جهت قرار گرفتن دستگاه در حال بی وزنی فشار دهید .

زمانی که حالت بی وزنی ۱ انتخاب شود چراغ نمایشگر که بر روی کلید قرار دارد به رنگ سبز در می آید و زمانی که حالت بی وزنی ۲ انتخاب شود این چراغ به رنگ آبی تغییر پیدا میکند.



HEAT

گرما:

این کلید را جهت فعال کردن سیستم گرمایشی فشار دهید .

زمانی که گرما در سطح ۱ باشد، چراغ نمایشگر به رنگ زرد روشن میشود و زمانی که گرما در سطح ۲ باشد به رنگ قرمز نشان داده میشود.



چراغ LED :

زمانی که این کلید را فشار دهید چراغ نمایشگر دسته به رنگ آبی در میاید و متوانید رنگ چراغ را برای سیستم پخش (بلندگو) و دسته صندلی تغییر دهید.

زمانی که این کلید را به مدت طولانی نگه داشته و فشار دهید چراغ های سیستم پخش و دسته صندلی ماساژور خاموش و روشن میشود و همچنی چراغ نمایشگر به رنگ سفید در میاید .



موزیک :

با فشردن این کلید، چراغ نمایشگر دسته به رنگ آبی در میاد و میتوانید به موزیک زیبا و دل نشین در زمان ماساژ گوش دهید .



افزایش / کاهش صدا :

با فشردن هر یک از این کلیدها میتوانید صدای دستگاه خود را کم و یا زیاد کنید.



(FAV1)
(FAV2)
(FAV3)
(FAV4)

برنامه های خودکار:

با فشردن این کلید ها میتوانید برنامه ماساژ دلخواه خود را که از قبل تنظیم کرده اید اجرا نمایید .

اگر برنامه ای را تنظیم نکرده باشید ، دستگاه برنامه ویش فرض خود را اجرا مینماید .



برای اضافه کردن برنامه ماساژ خودکار به دستگاه این کلید را فشرده و نگهدارید . اگر عملیات موفقیت آمیز باشد چراغ نمایشگر به رنگ آبی در میاید .



توقف سریع :

برای توقف سریع دستگاه این کلید را فشار دهید . پس از توقف سریع چراغ های نمایشگر به رنگ سفید در میاید .

راهنمای صفحه کنترل لمسی – صوتی

فرمان صوتی هوشمند

غیر فعال کردن فرمان صوتی : شما میتوانید با استفاده از صفحه نمایش (تبلت) این قابلیت را غیر فعال نمایید.

از روی صفحه نمایش گزینه **system** را انتخاب نمایید و سپس کنترل صوتی را خاموش نمایید.

صندلی ماساژور شما دارای قابلیت فرمان صوتی یا کنترل صوتی میباشد و از طریق آن میتوانید بدون دخالت دست ، دستورات از پیش تعریف شده را به دستگاه خود دهید .

فعال کردن فرمان صوتی : برای فعال کردن این قابلیت مجدد گزینه **system** را انتخاب نمایید و قابلیت فرمان صوتی را فعال کنید.

همچنین میتوانید با لمس دکمه ای که بر روی بلندگوی سمت چپ قرار دارد این سیستم را فعال نمایید .

توجه : برای اعمال فرمان صوتی دقت بفرمایید که کلمات را بدرستی تلفظ کنید تا فرمان شما اجرا شود.

فرمان های صوتی صندلی ماساژور GLS541
Turn off massage chair
Flex massage
Stretch massage
Gentle massage
Deep Breath massage
Energize Massage
Rest & Recover Massage
Upper Body Massage
Neck & Spine Massage
Lower Body Massage
Tension Release Massage
Full Body Massage
Demo Massage
Start Foot Rollers
Foot Rollers Off
Start Heat
Heat Off
Increase The Volume
Turn Volume Down

عملکرد و امکانات

۱- با فشردن یک کلید صندلی ماساژور بطور خودکار به سمت جلو حرکت میکند. این دستگاه ۲۸ سانتی به سمت جلو حرکت کرده و سپس شروع به اجرای برنامه ماساژ مینماید. این قابلیت باعث میشود که از فضای خود بهتر و بهینه استفاده نمایید.

۲- حالت بی وزنی

در حالت بی وزنی وضعیت پاها نسبت به تنه کمی بالاتر قرار میگیرد که این امر باعث میشود وزن بدن بصورت یکسان در سرتاسر بدن پخش شود و باعث کاهش فشار بر روی ستون فقرات و مفاصل میشود.

۳- افزایش طول قسمت پایی بصورت خودکار / دستی :

قسمت پایی دستگاه این قابلیت را دارد که با توجه به طول پای کاربر تنظیم شود. علاوه بر این میتوانید با استفاده از کنترل دستگاه طول این قسمت را بصورت دستی تنظیم نمایید. (طول قسمت پایی تا ۱۵ قابل تنظیم میباشد).

۴- ماساژ بوسیله کیسه های هوا

در این صندلی ماساژور برای قسمت های مختلف بدن از جمله کتف و شانه، بازو، پشت، کمر، لگن، ساق پا و کف پا کیسه های هوا تعبیه شده است که بوسیله آن ها بدن شما را ماساژ میدهد.

۵- ماساژ بوسیله غلتک

در این صندلی ماساژور در قسمت کف پا غلتک هایی قرار گرفته است که میتواند این ناحیه از بدن را بطور کامل ماساژ دهد.

۶- انواع تکنیک های ماساژ

در این صندلی ماساژور انواع تکنیک های ماساژ از جمله مالشی، کوبه ای، همگام سازی، شیاتسو، سیاتسو سه بعدی وجود دارد که بصورت دقیق و حرفه ای شبیه سازی شده است.

۷- کنترل صوتی هوشمند

برای مدیریت و کنترل بهتر و آسان تر صندلی ماساژور، سیستم صوتی هوشمند در این دستگاه قرار گرفته است.

بررسی های مقدماتی

روش نصب

تمام اجزا صندلی را از جعبه خارج نمایید


مرحله اول: تمام اجزا صندلی را خارج کنید: کارت را باز کنید و به دقت اجزای اتصال دهنده، لوازم جانبی و... خارج سازید

توجه: تمام لوازم جانبی را باید مقایسه نمایید تا از بودن تمامی اجزا اطمینان حاصل نمایید.

مرحله دوم: نصب قسمت بازویی

شلنگ های هوای شماره گذاری شده را به نازهای مربوطه که با شماره مشخص شده اند متصل نمایید.




قسمت باز / دسته

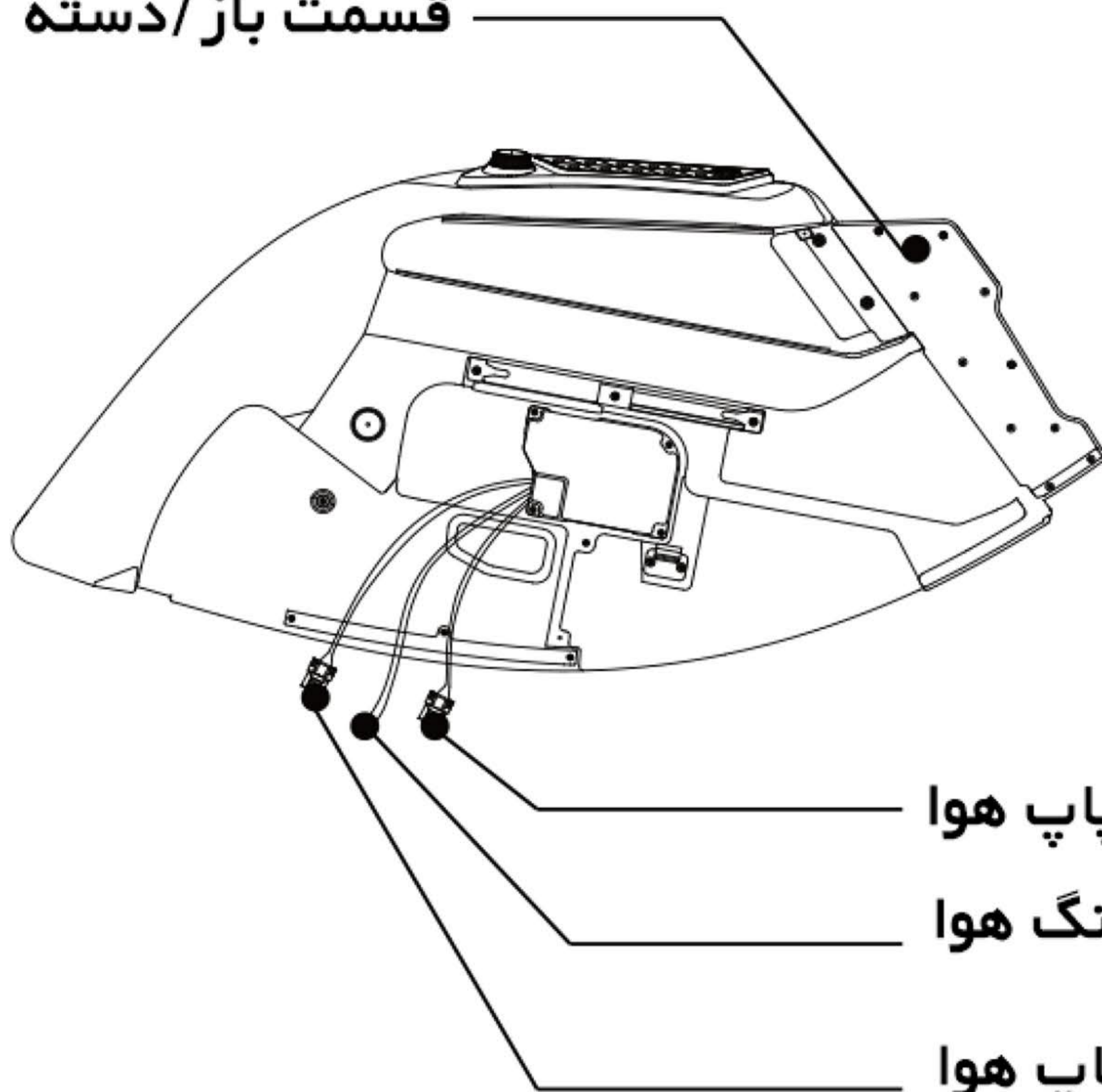

دو شاخه سوپاپ هوا


شلنگ هوا

دو شاخه سوپاپ هوا

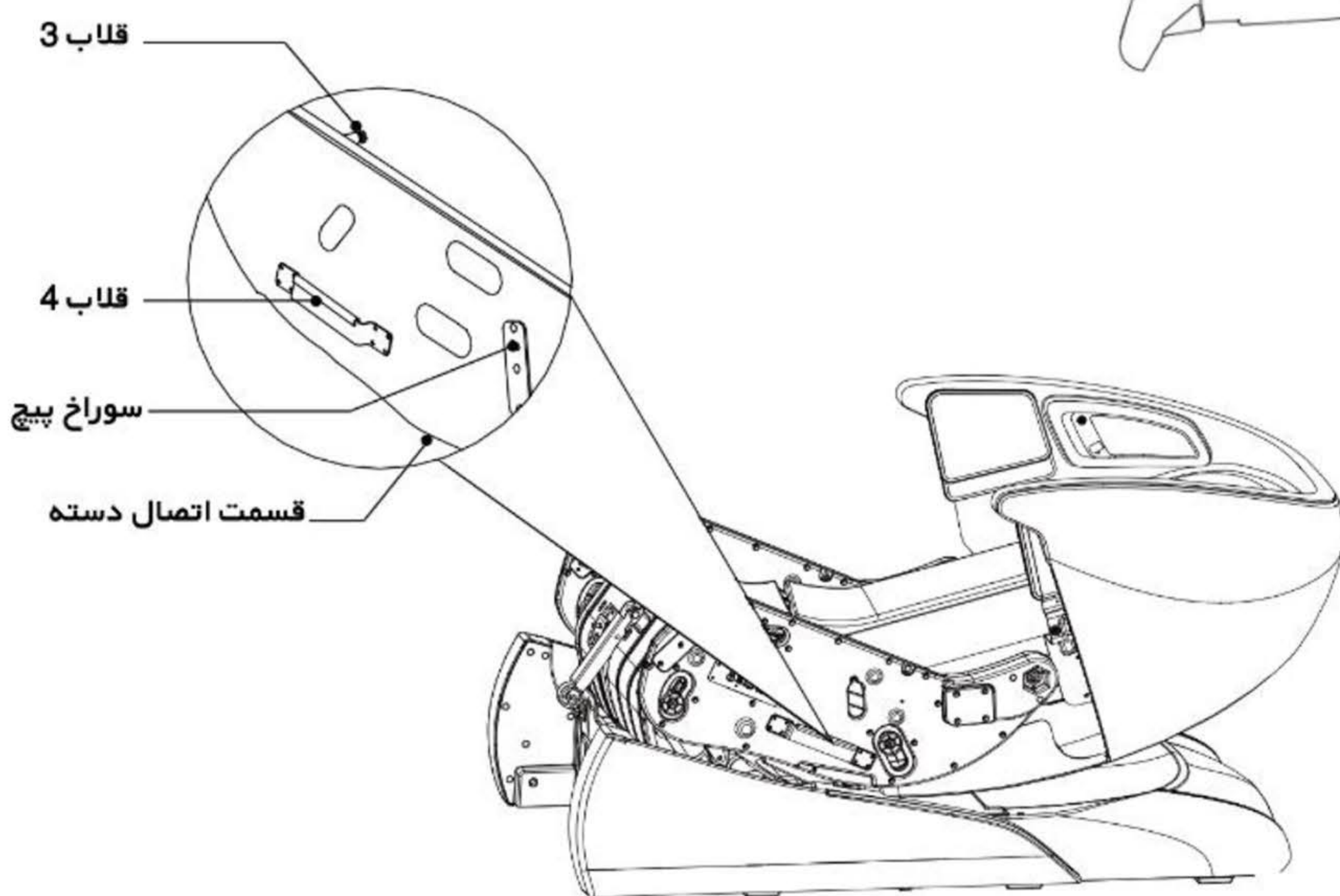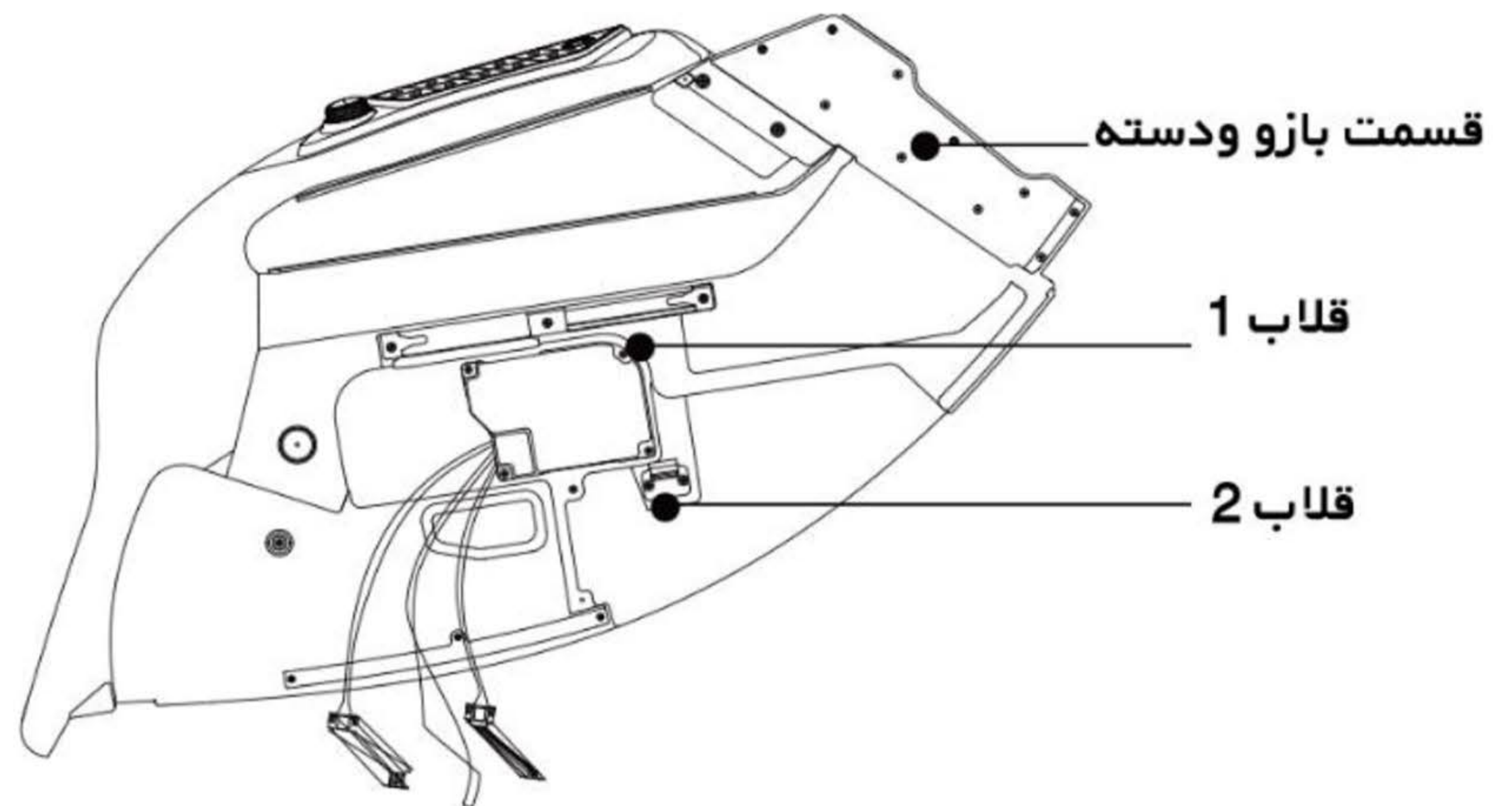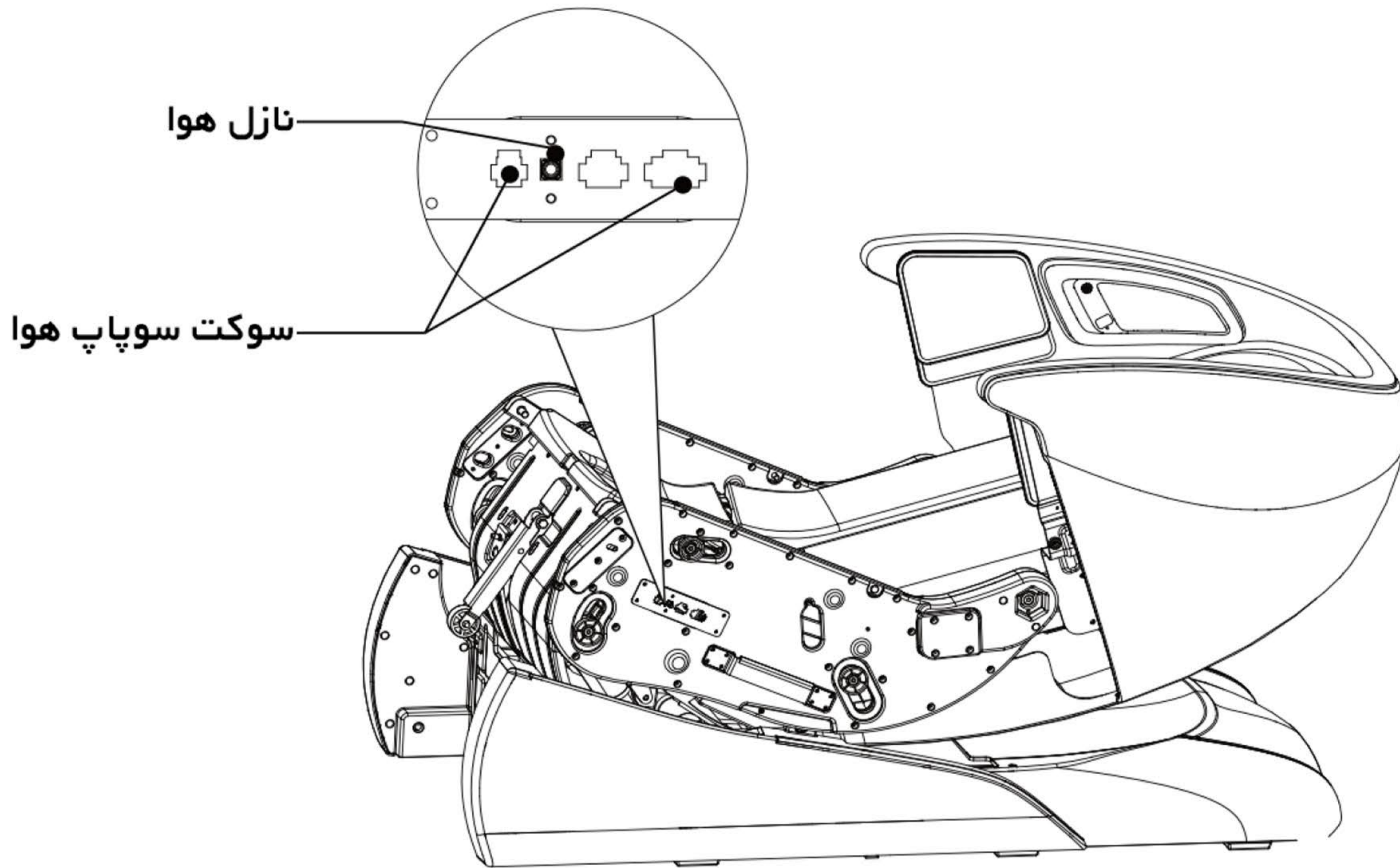

نصب دستگاه کنترل لمسی

ابتدا پایه دستگاه کنترل را در محل خود قرار دهید و سپس مهره آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا پایه محکم شود.
در انتها سیم دستگاه کنترل را در ورودی مربوطه در کنار صندلی قرار دهید .

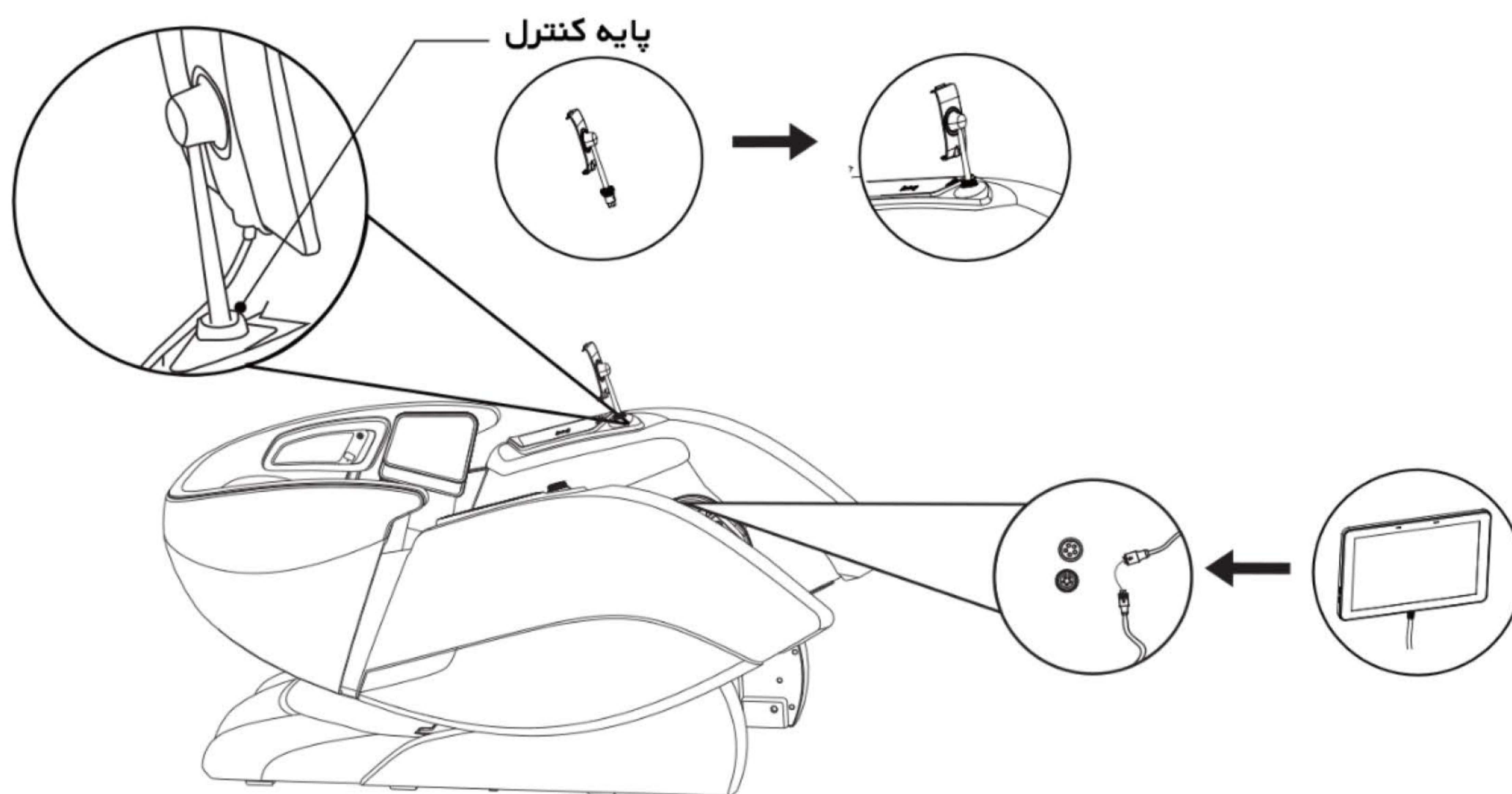



نصب قسمت پایی

قسمت ساق پا را بلند کنید . شلنگ هوا را درون نازل هوا قرار دهید و سپس سوپاپ هوا را در دریچه هوا قرار دهید که در قسمت جلوی پایی قرار دارد .

قلاب پایی که در زیر قسمت پایی قرار دارد را هم سطح گیره آن در صندلی ماساژور قرار داده و جایگذاری کنید.

ابتدا یک طرف را نصب کنید و سپس طرف دیگر آن را.

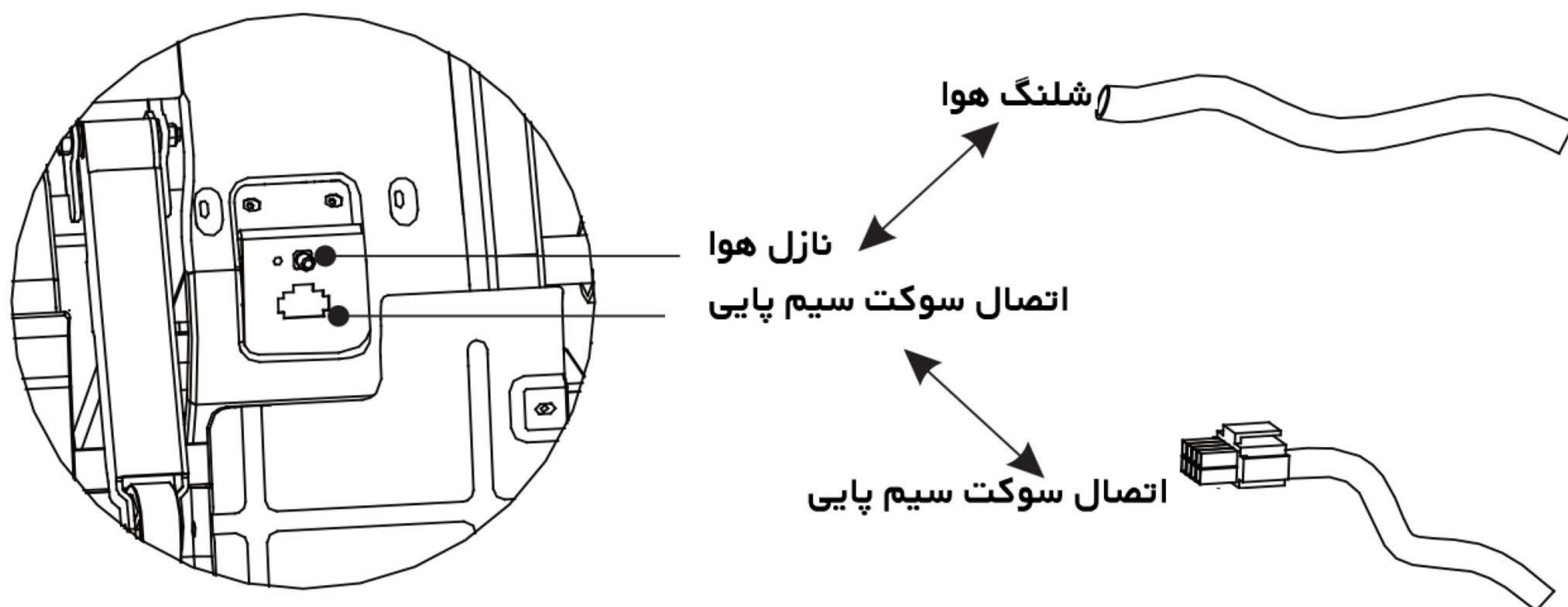

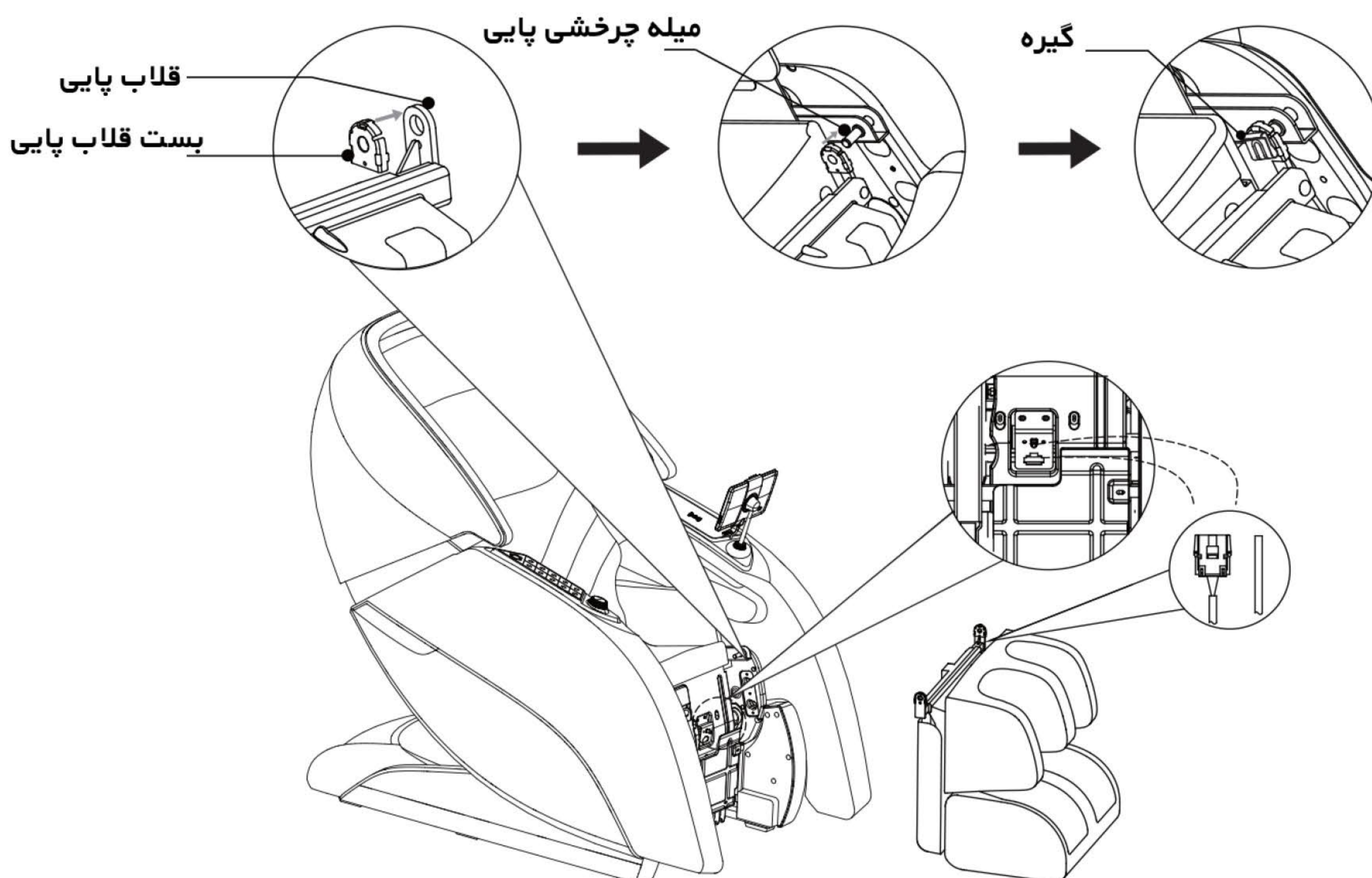

قسمت پایی را بلند کنید و شلنگ هوا را درون نازل مربوطه قرار دهید و سپس سوپاپ هوا را درون دریچه شیر هوا قرار دهید.


قدم نهایی

کابل برق را به سوکت مربوطه در جعبه برقف وصل کنید.

صندلی ماساژور را به برق متصل نمایید و سپس آن را روشن کنید. با استفاده از کنترل دستگاه میتوانید پشتی آن را به سمت بالا تغییر وضعیت دهید.

روش جا به جایی

در زیر صندلی غلتکهای چرخانی تعبیه شده است ، پشت صندلی را تا بالاترین نقطه حرکت دهید ، دستگاه را خاموش کنید و سیم برق صندلی را بکشید ، قسمت جلوی صندلی را همانگونه که در شکل میبینید به سمت بالا حرکت دهید(یکنفر جلوی صندلی را همانگونه که دستگاه های مخصوص جا به جایی را در دست دارد بالا بیاورد و یک نفر زمانیکه بالای صندلی را به جلو گرفته حرکت دهد) صندلی را با غلطکها جا به جا کنید.

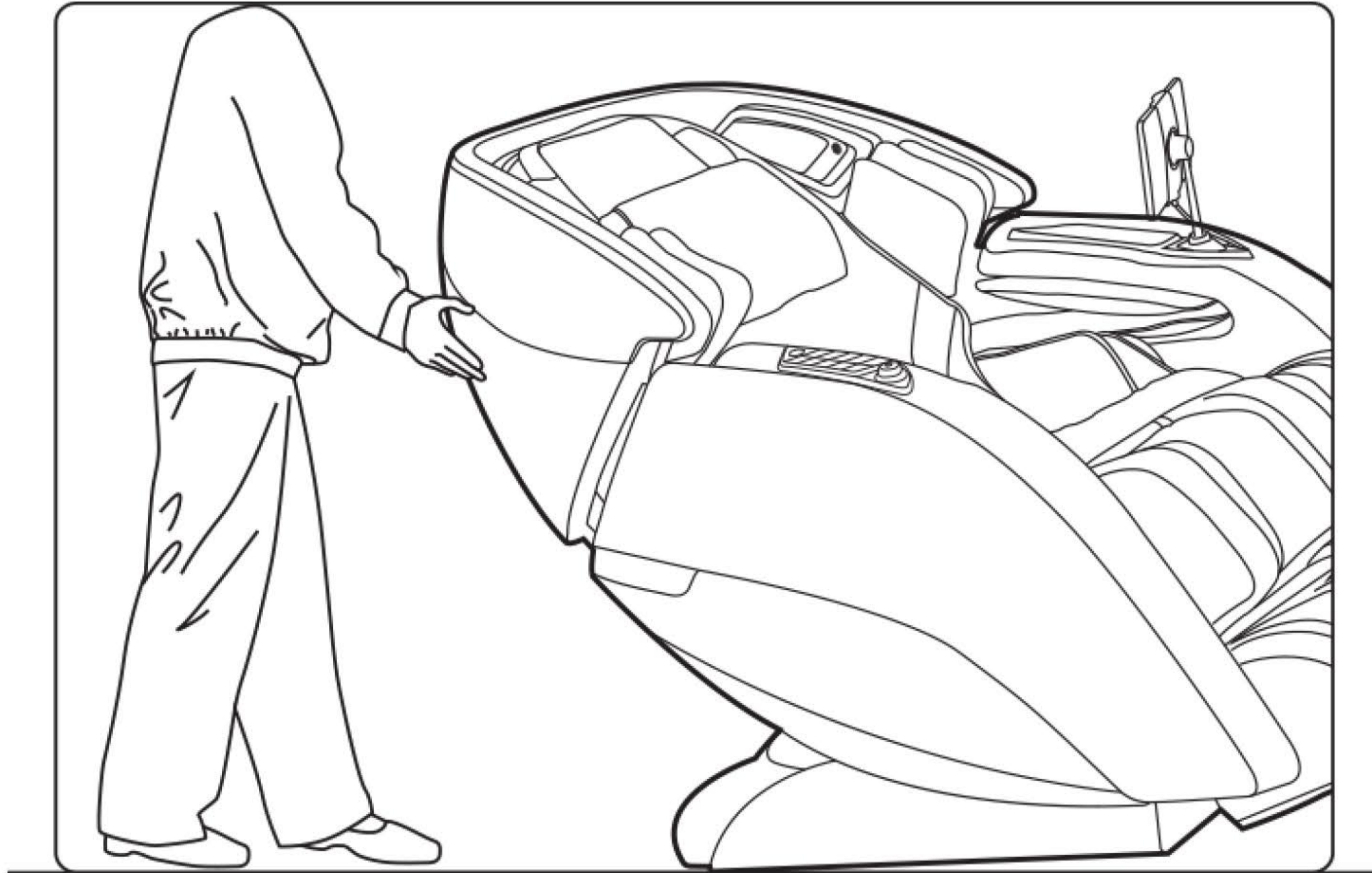


احتیاط

از حرکت دادن صندلی زمانی که فردی بر روی آن نشسته خودداری کنید.

برای جا به جایی صندلی از دسته های مخصوصی در پشت و جلو تعبیه شده در پشت و جلو استفاده کنید و هرگز از دسته های اصلی صندلی برای جابه جایی استفاده نکنید.

اتصال به برق : سیم برق را به پریز با سه ورودی وصل کنید و کلید برق تعبیه شده در زیر صندلی ماساژور را روشن کنید.

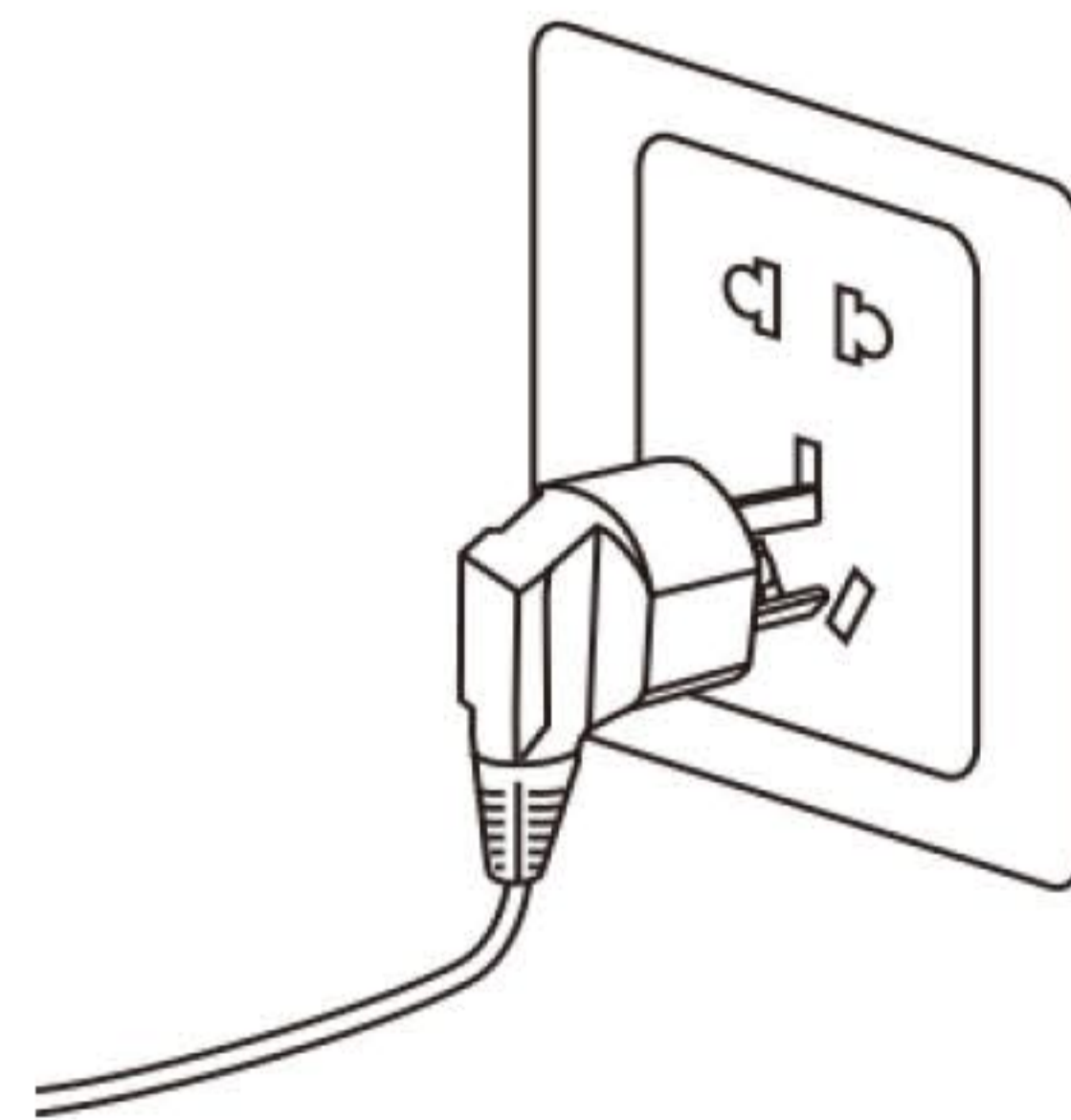


احتیاط



پیش قبل از روشن ساختن صندلی از سالم بودن سیم برق و دیگر سیمهای موجود اطمینان حاصل نمایید از خاموش بودن کلید برق قبل از اتصال صندلی به منبع برق اطمینان حاصل نمایید.


وضعیت نصب

- رعایت فاصله ی ایمنی پیرامون صندلی :از موجود بودن فضای کافی برای نصب این محصول اطمینان حاصل نمایید.
- پشت حد اقل ۶۰ سانتی متر از دیوار یا هر مانع دیگر.
- جلو حد اقل ۳۰ سانتی متر از دیوار یا هر مانع دیگر.
- به منظور جلوگیری از تداخل سیگنالها دستگاه را حد اقل با فاصله یک متری از تلویزیون ،رادیو یا دیگر وسایل صوتی تصویری قرار دهید.

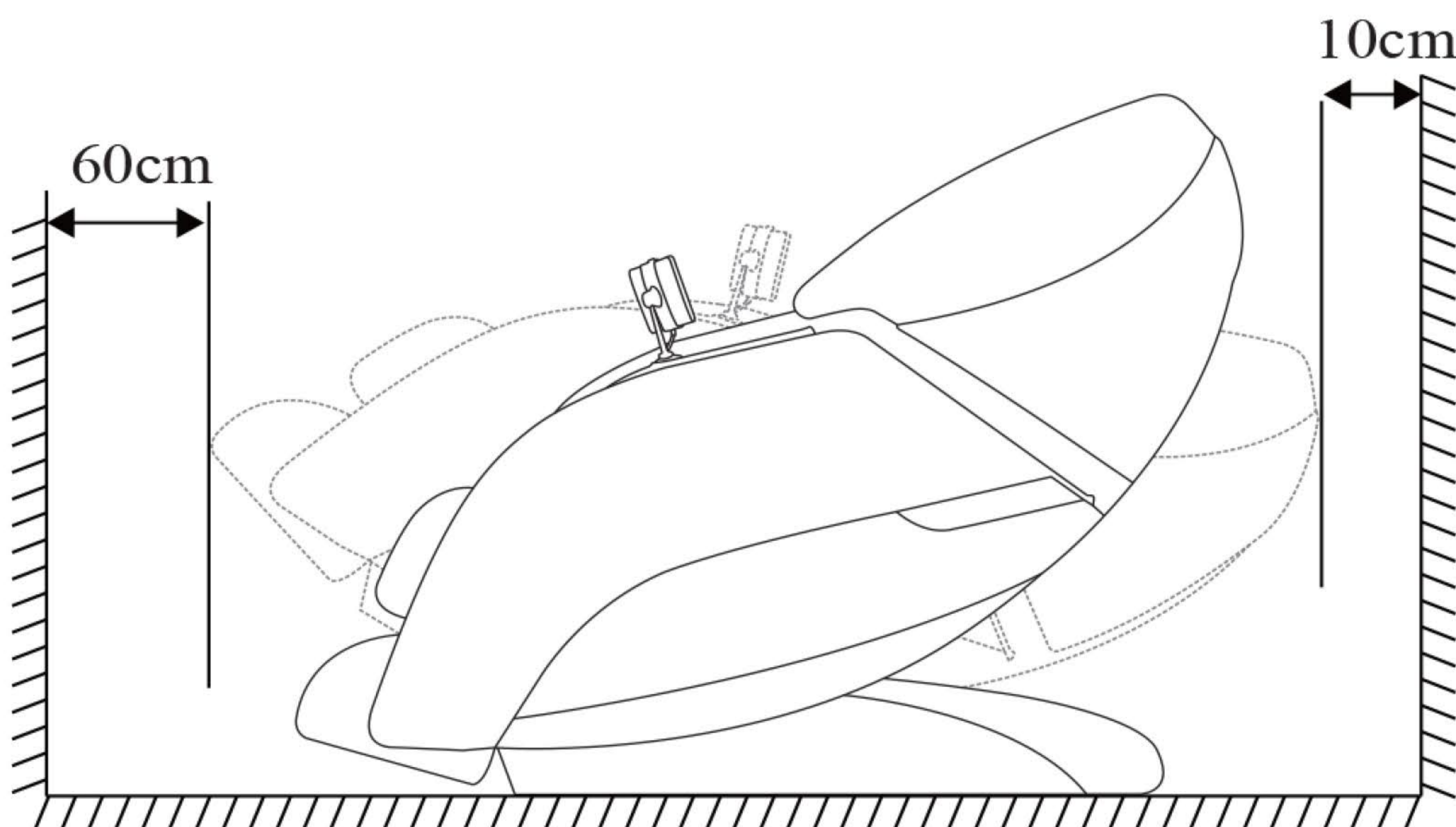




صندلی ماساژور را در فاصله ۱.۵ متری نسبت به محل اتصال به برق قرار دهید.

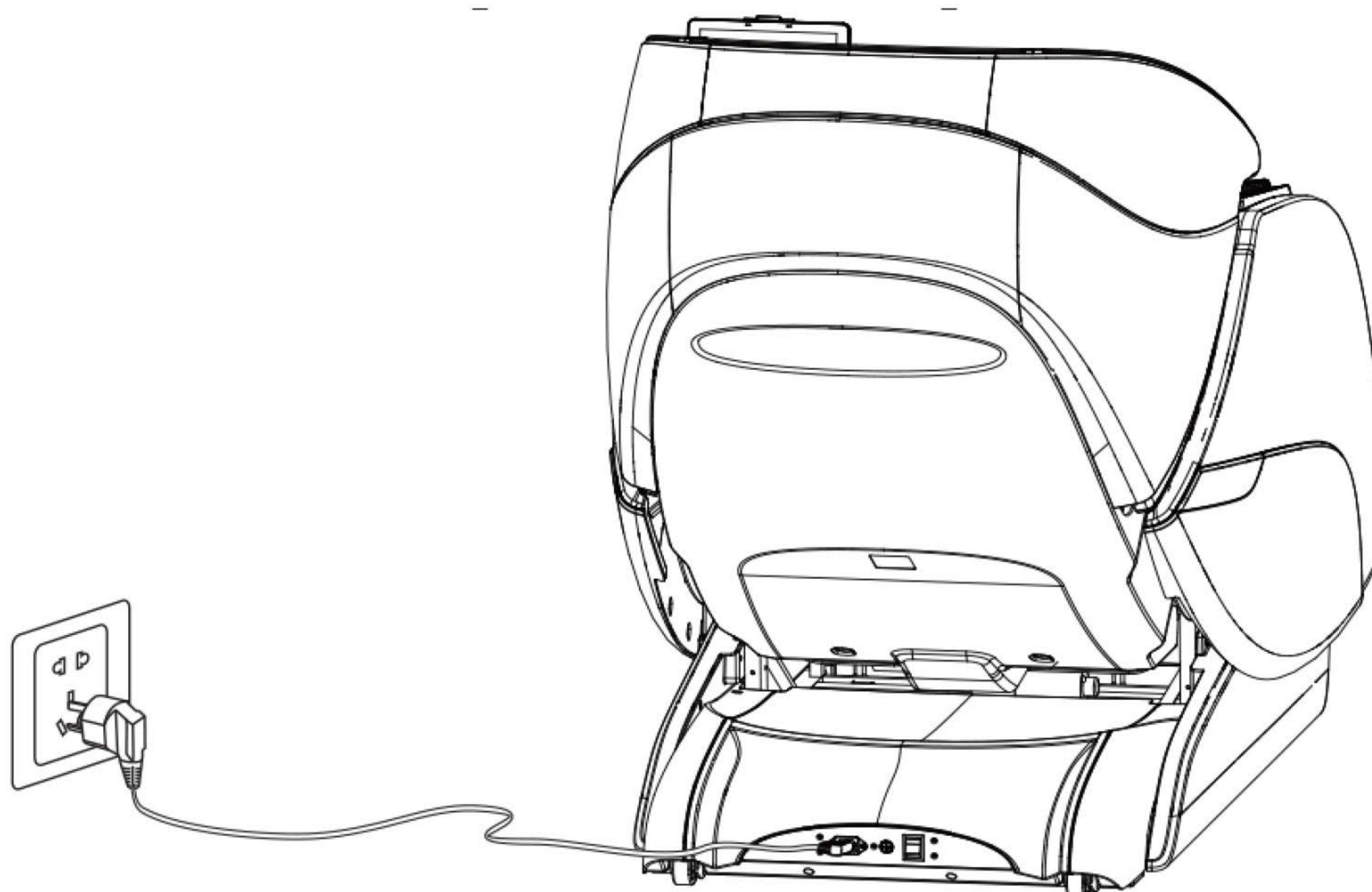


به منظور جلوگیری از هرگونه تاثیر غیر پیش بینی شده از سوی زمین دستگاه را بر روی فرش یا کفپوش قرار دهید.

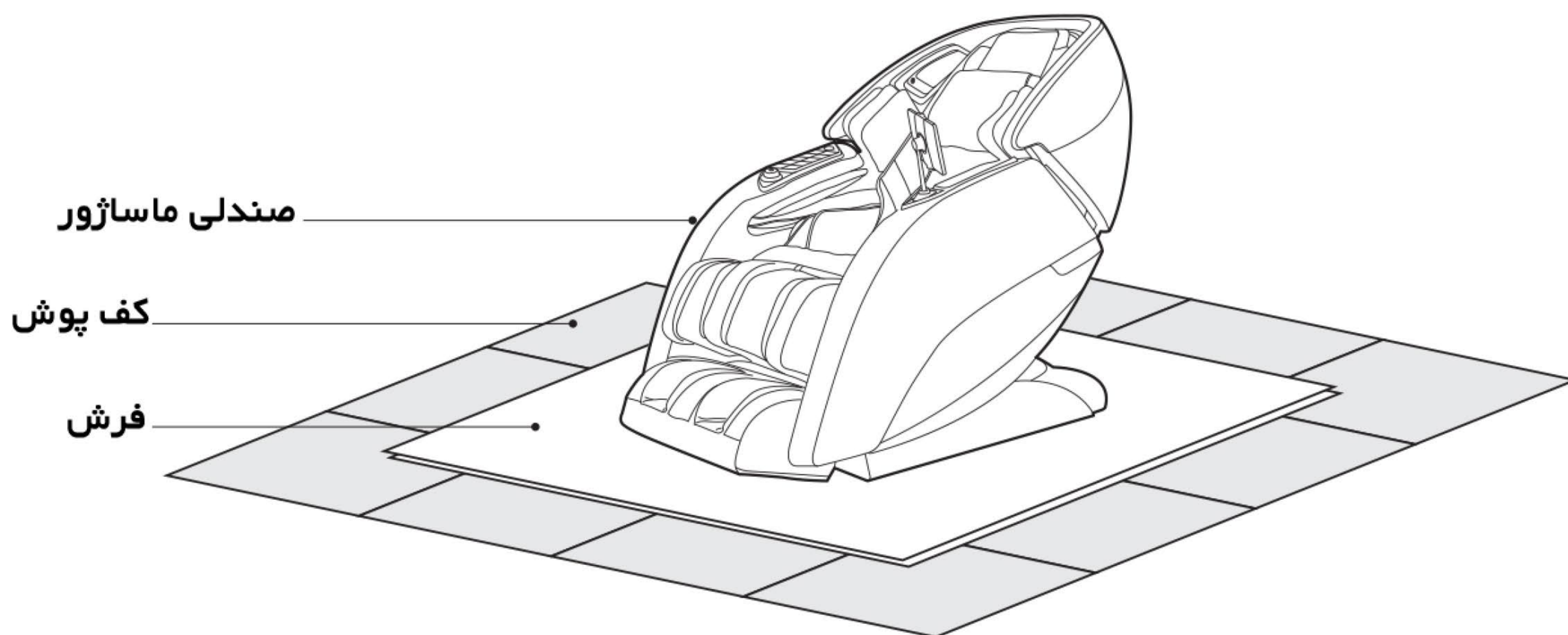



فعال ساختن صندلی ماساژ

پیش از فعال کردن از بودن فضای کافی اطراف صندلی اطمینان حاصل کنید سپس با استفاده از کنترل پشتی صندلی را به عقب خم کنید قسمت پایی را به بالاتر حالت ممکن حرکت دهید و صندلی را در پهن ترین حالت ممکن قرار دهید. پس از آنکه از عملکرد مناسب در تمامی مراحل اطمینان یافتید صندلی را خاموش کنید و آن را به حالت اول بازگردانید. (برای چگونگی انتخاب برنامه به دستورالعمل کنترل و دستورالعمل منوی صفحه نمایش مراجعه کنید)

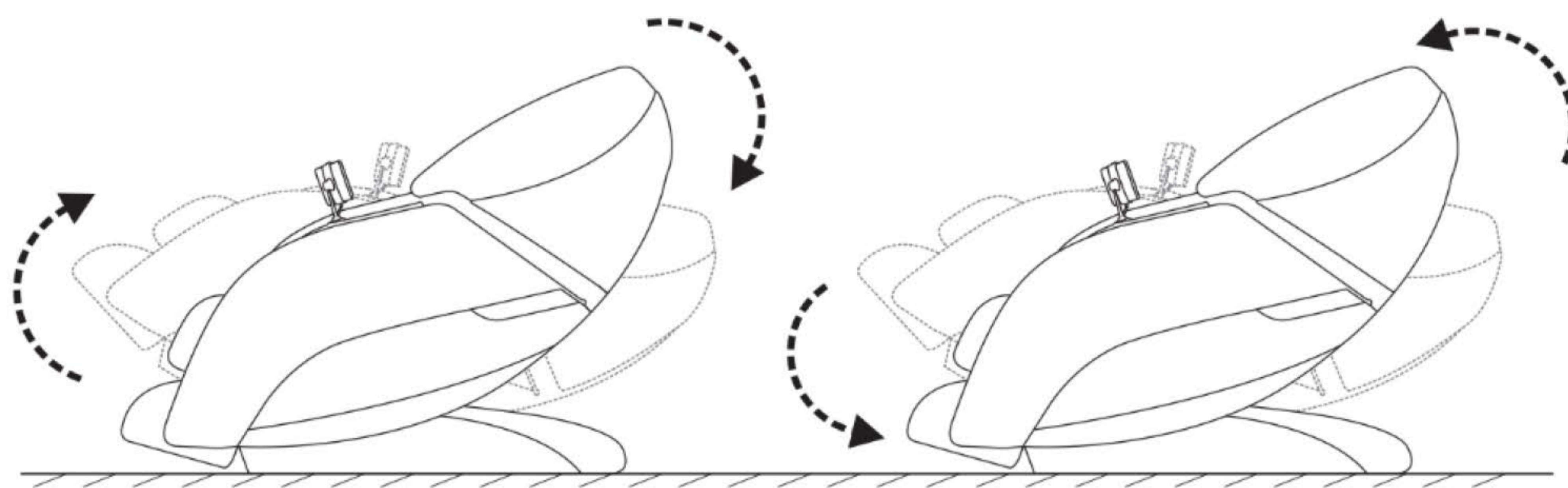

احتیاط

لطفاً از قراردادن انگشت یا اشیای دیگر در حد فاصل پشتی و قسمت پایی خودداری کنید.
پس از تنظیم بالا، پایین، پشتی و قسمت پایی از نبودن مانع در اطراف صندلی اطمینان حاصل نمایید.

پیش از نشستن بر روی صندلی از نصب قسمت پایی اطمینان حاصل نمایید، از قرار گرفتن صندلی در وضعیت اصلی و مناسب اطمینان حاصل نمایید، اگر یکی از اجزا در وضعیت درست قرار نگرفته بود دستگاه را خاموش کرده تا دستگاه به وضعیت اصلی برگردد.

احتیاط

اگر قسمت پایی قبل از قراردادن پا به سمت بالا حرکت کرد بر روی صندلی ننشینید.
 جسم سنگین را بصورت ناگهانی بر قسمت پایی قرار ندهید چراکه ممکن است به صندلی آسیب زده و یا در مکانیسم صندلی اختلال ایجاد کند.

بلوتوث

این محصول با در اختیار داشتن بلوتوث به وسایل صوتی تصویری متصل می گردد.
 موزیک مورد نظر را در دستگاه اجرا کنید. ۱ ۴۵ GLS ابتدا بلوتوث وسیله ی صوتی خود را فعال ساخته و با انتخاب

محیط اطراف

صندلی را از مکانهای خیس مانند حمام دور نگه داری کنید تا از اتصالی برق جلوگیری شود.
 صندلی را از وسایل گرمازا مثل گاز ، بخاری دور نگه داری کنید تا از سوختگی یا آسیب به چرم صندلی جلوگیری شود.

مستقر سازی

دستگاه فوق به گروه وسایل برقی تعلق دارد.
 لطفاً از اتصال صحیح سیم برق اطمینان حاصل نمایید تا از هرگونه اتصالی و یا شوک الکتریکی و تاثیرات منفی خودداری شود.

نگهداری

بمنظور پاک سازی کاورقسمتهای مختلف صندلی از پارچه ی کتان آغشته به مواد پاک کننده مناسب استفاده کرده و پس از آن با پارچه کتان دیگر قسمتهای مرطوب را خشک نمایید.
 برای پاک سازی کنترل و قسمتهای الکترونیکی مانند جعبه برق از پارچه خشک استفاده نمایید.

احتیاط

پیش از پاکسازی از قطع بودن سیم برق اطمینان حاصل نمایید و بعد از اتمام پاکسازی از وارد نشدن ماده پاک کننده به داخل جعبه برق اطمینان حاصل نمایید.
 از اتو کردن کاورهای صندلی خودداری نمایید.

روش انبار کردن:

پس از استفاده گرد و خاک را از روی دستگاه پاک نمایید .

اگر دستگاه برای مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار نگرفت آن را با کاور بپوشانید

دستگاه را زیر نور مستقیم آفتاب یا مکانهایی با درجه حرارت بالا انبار نکنید چراکه موجب تغییر رنگ کاور دستگاه میشود.

نکات مهم:

- هنگام استفاده روزانه نشانه هایی که در ادامه آمده است را چک کنید:

- بوی سوختگی

- با لمس سیم دستگاه روشن و خاموش شود (اتصال سیم)

- سیم برق داغ شود.

- دیگر نشانه های غیر معمول...

احتیاط

بمنظور جلوگیری از سانحه و از کار افتادگی در صورت بروز هر یک از نشانه های بالا از استفاده از دستگاه اجتناب کنید همچنین دوشاخه را از برق بیرون بکشید سپس با مرکز خدمات برای رفع مشکل تماس حاصل نمایید.
 انجام کلیه امور مربوط به تعمیرات و خدمات دستگاه فقط از جانب تعمیرکاران مجاز مرکز خدمات انجام شود.



مشکل یابی

مشکل	دلیل احتمالی	راه حل
۱ صدای ژو ژو یا تا تا شنیده شود	صدایی طبیعی است که توسط موتور در حال فعالیت تولید میشود و یا زمانی شنیده میشود که گوی های ماساژور بر روی کاور سندلی کشیده میشود	پدیده ای طبیعی است و نیاز به تعمیر ندارد.
۲ دستگاه روشن نشود	کلید منبع برق روشن نشده	کلید را روشن کنید
	فیوز سندلی ماساژ خراب شده	فیوز جدید جایگزین کنید
	دستگاه از منبع برق جدا شده	دستگاه را به منبع برق متصل کنید
۳ کیسه هوایی تعبیه شده بر روی سندلی یا قسمت پایی عمل نکند	انسداد یا قطع لوله هوایی	لوله هوایی را تمیز کرده و مجدداً در جایگاه خود متصل نمایید.

* اگر به جز رویدادهای بالا رویداد غیر طبیعی دیگری در دستگاه رخ داد لطفاً با مرکز خدمات تماس حاصل نمایید

* هیچگاه اجزاء سندلی را خودتان جدا نکنید چرا که شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال آسیب محصول یا افراد را به دلیل عدم استفاده صحیح به عهده نخواهد گرفت.

برای همکاریتان کمال تشکر را داریم

