

# بالش ماساژور شیاتسو



دفترچه راهنما

دستور العمل های استفاده

قبل از استفاده دستور العمل ها را مطالعه کنید

## فهرست مطالب



- هشدارها و اقدامات احتیاطی ..... ۴-۱.
- دستورات ایمنی مهم ..... ۲.
- محل قطعات و کنترل ها ..... ۵.
- نحوه استفاده از ماساژور ..... ۶.
- نگهداری و مراقبت از محصول ..... ۶.

## نکات مهم ایمنی

استفاده از این دستگاه مخصوص بزرگسالان است. افرادی که باردار هستند، دستگاه پیس مکر دارند، دیابت، قلبیت یا ترومبوزیس دارند، در معرض خطر افزایشی لخته های خون پزشکی یا مشکلات گردش خون یا سایر اختلالات در سیستم عروقی خود هستند، باید از استفاده از آن خودداری کنند.

- قبل از استفاده از دستگاه ماساژ، برای استفاده خانگی اقدام کنید. سوختگی های طراحی شده برای خواندن دستورات عمل ها، انجماد فیزیکی جرم ممکن است باعث بی هوشی یا تنظیم کنترل ناخودآگاه شود.
- روی نوزاد یا فردی که خوابیده یا بی هوش است استفاده نکنید.
- روی پوست بی حسی یا فردی که گردش خون ضعیف دارد استفاده نکنید.
- دستگاه را که با ناحیه گرم شده دستگاه در تماس است، به طور مکرر بررسی کنید تا از خطر ایجاد تاول جلوگیری شود.

## ⚠ هشدار

برای کاهش خطر برق گرفتگی، قاب را باز نکنید.

- درون این دستگاه هیچ قطعات یا بخش های سرویس پذیری وجود ندارد. به هیچ وجه آن را باز نکنید.
- برای کاهش خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

## احتیاط

### دستورالعمل های ایمنی مهم

⚠ علامت علامت تعجب درون یک مثلث مساوی، برای آگاه کردن شما / کاربر از وجود دستورالعمل های مهم عملیاتی و نگهداری در مدار همراه با دستگاه طراحی شده است.

- تمام دستورالعمل های ایمنی و عملیاتی باید قبل از استفاده از دستگاه خوانده شده، رعایت و دنبال شوند.
- ⚠ هنگام استفاده از هر دستگاه برقی، همیشه احتیاط های اولیه باید رعایت شود که شامل موارد زیر است:

خطر – برای کاهش خطر برق گرفتگی:



## هشدار و دستورالعمل های ایمنی دستگاه

۱. همیشه این دستگاه را بلافاصله پس از استفاده و قبل از تمیز کردن از پریز برق جدا کنید.
۲. به دستگاهی که در آب افتاده است دست نزنید. آن را بلافاصله از پریز برق جدا کنید.
۳. در حین حمام یا دوش گرفتن از این دستگاه استفاده نکنید.
۴. دستگاه را جایی قرار ندهید یا نگهداری نکنید که بتواند در وان یا سینک افتاده یا کشیده شود. آن را در آب یا مایعات دیگر قرار ندهید یا به داخل آن رها نکنید.
۵. هرگز از سوزن ها یا اتصالات فلزی دیگر با این دستگاه استفاده نکنید.
۶. پوشش دستگاه را قبل از هر بار استفاده با دقت بررسی کنید. اگر پوشش نشانه ای از فرسودگی مانند ترک خوردگی، تاول زدن یا شکستگی داشته باشد، دستگاه را دور بیندازید.
۷. دستگاه را خشک نگه دارید. در محیط های مرطوب یا خیس از استفاده از آن خودداری کنید.

## هشدار

برای کاهش خطر سوختگی، آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به افراد:

۱. هرگز دستگاه را در حالی که به پریز متصل است، بدون نظارت رها نکنید. هنگام عدم استفاده و قبل از نصب یا جدا کردن قطعات، آن را از پریز برق جدا کنید.
۲. وقتی این دستگاه توسط کودکان، بیماران یا افراد معلول استفاده می شود یا در نزدیکی آن ها قرار می گیرد، نظارت دقیق لازم است.
۳. از این دستگاه فقط برای استفاده مورد نظر که در این راهنمای کاربری توضیح داده شده است استفاده کنید. از اتصالاتی که توسط سازنده توصیه نشده اند استفاده نکنید.
۴. هرگز از این دستگاه در صورت آسیب دیدن سیم یا پریز آن استفاده نکنید. اگر دستگاه...

اگر این دستگاه افتاده یا آسیب دیده باشد یا در آب افتاده باشد، به درستی کار نمی‌کند. هرگز سعی نکنید آن را تعمیر کنید. دستگاه را برای معاینه و تعمیر به مرکز خدمات بازگردانید.

### دستورالعمل‌های ذخیره‌سازی

۵. دستگاه را با چرخ‌ها یا سیم آن حمل نکنید.

۶. سیم را از سطوح داغ دور نگه دارید.

۷. هیچ شیء را در بازه‌ها خم نکنید یا وارد نکنید.

۸. در فضای باز استفاده نکنید. این دستگاه فقط برای استفاده در فضای داخلی طراحی شده است.

۹. هرگز این دستگاه (محصولات اسپری) را رها نکنید یا هنگام برداشتن آن.

۱۰. در مناطقی که در معرض دودهای قابل اشتعال یا مضر هستند استفاده نکنید.

۱۱. در حضور اکسیداسیون و/یا پریز قابل جدا شدن آنها استفاده نکنید.

۱۲. تمام کنترل‌ها را برای منابع توان در حالت خاموش جدا کنید.


۱۳. پریز برق را بیش از حد بارگذاری نکنید. فقط از پریزهای برق مجاز استفاده کنید تا از ظرفیت برق پریز شوک الکتریکی یا خطر دیگر ایجاد نشود.

۱۴. هرگز خطر آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی یا... از تلاش‌ها جلوگیری نمی‌شود. افراد وقتی دستگاه در خارج است. اگر سیم برق آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده یا مرکز خدمات مجاز قبل از استفاده تعویض شود.

۱۵. از استفاده از این محصول به عنوان سنگ پله با کشیدن سیم برق خودداری کنید.

## محل اجزا و کنترل ها

۱. گره های ماساژ
۲. واحد اصلی
۳. خروجی برق
۴. آداپتور

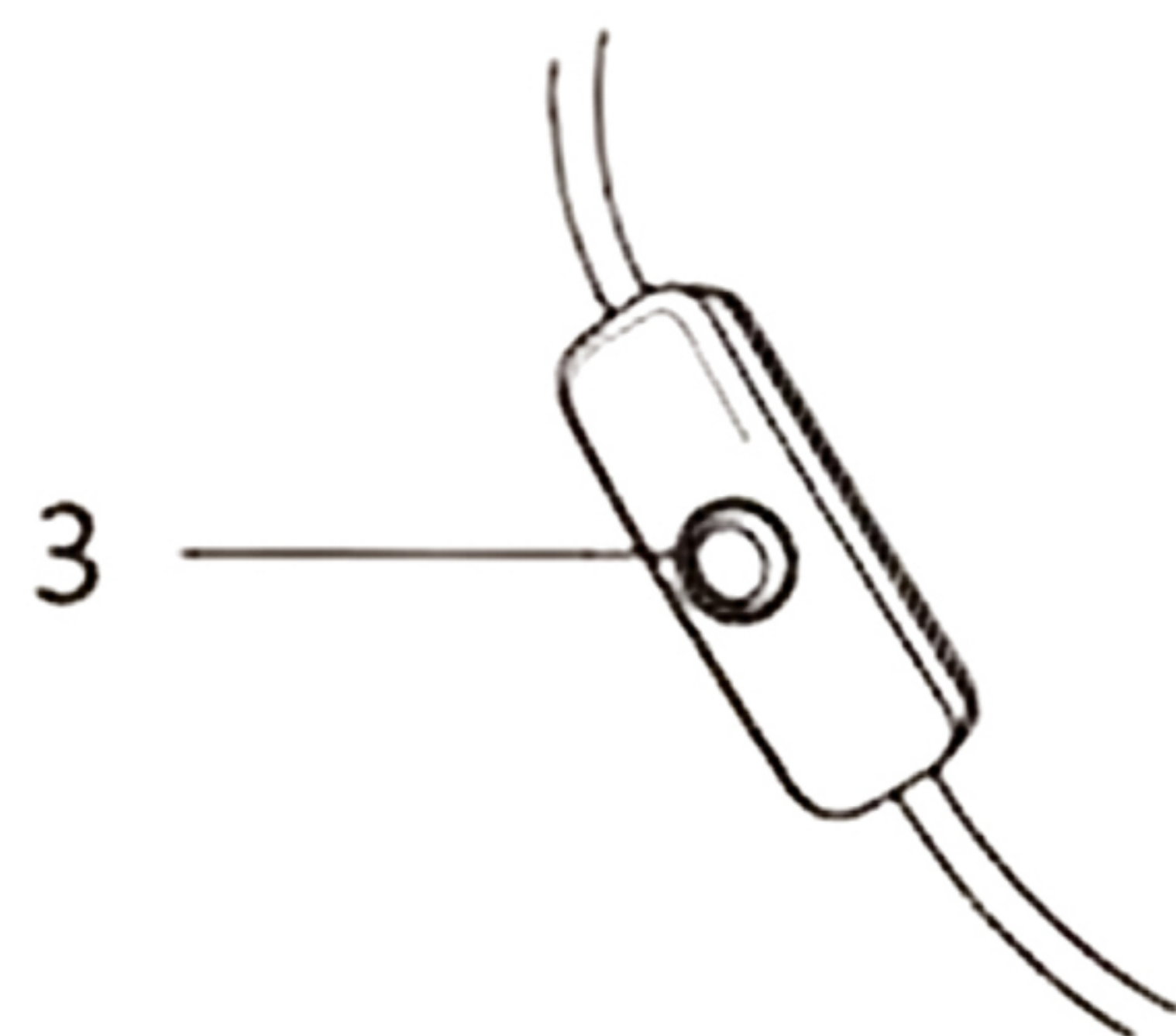

## استفاده از ماساژور

۱. آداپتور را به ماساژور متصل کنید. آداپتور را به پریز برق وصل کنید.

۲. برای شروع ماساژور، دکمه POWER را فشار دهید.

۳. برای تغییر جهت ماساژ، برای بار دوم دکمه POWER را فشار دهید.

۴. برای خاموش کردن قابلیت حرارت، برای بار سوم دکمه POWER را فشار دهید.

۵. برای خاموش کردن دستگاه، برای بار چهارم دکمه POWER را فشار دهید.

• جهت ماساژ به طور خودکار هر یک دقیقه تغییر می کند.



## مراقبت و نگهداری محصول

۱. وقتی از ماساژور استفاده نمی کنید، آن را در مکانی ایمن، خنک و خشک قرار دهید.

۲. پس از جدا کردن از برق، دستگاه را با پارچه نرم و مرطوب و با استفاده از مواد پاک کننده غیرساینده تمیز کنید.

۳. هرگز دستگاه را در هیچ مایعی غوطه ور نکنید.

۴. دستگاه را از تمام حلال ها و مواد شوینده شدید دور نگه دارید.

۵. هرگز سعی نکنید این ماساژور را تعمیر کنید. هیچ قطعه ای در آن قابل تعمیر توسط کاربر نیست.



مشخصات:

ولتاژ مجاز: DC12V

برق مصرفی: 24W