



نیکان آسا
پرشهن

ماساژورپا
RK-858

دفترچه راهنما

BESTREST





با تشکر از انتخاب محصول ما.
لطفا دفترچه راهنما را برای استفاده صحیح و مناسب با دقت مطالعه فرمایید.

فهرست

۱	نکات امینی.....
۳	ساختار محصول.....
۳	ویژگی های محصول.....
۳	آماده سازی قبل از استفاده.....
۴	روش استفاده از ریموت کنترل.....
۵	دستورالعمل استفاده از ریموت کنترل.....
۶	نگهداری و تعمیر.....
۷	عیب یابی و مشخصات فنی.....

نکات ایمنی

با تشکر از انتخاب محصولات ما، لطفاً بمنظور استفاده صحیح و مناسب، نکات ایمنی را قبل از استفاده با دقت مطالعه فرمایید. مطالعه نکات ایمنی به شما کمک می‌کند تا از محصول بصورت کاملاً ایمن بهره ببرید و از برخی خطرات اجتناب کنید. تمامی نکات ایمنی به دو عبارت "هشدار" و "توجه" تقسیم بندی شده اند. بعد از مطالعه لطفاً آن را در جایی که به راحتی قابل دسترس و خواندن است نگه دارید.

هشدار

از منبع برق با ولتاژ غیر مشخص استفاده نکنید	استفاده از منبع برق ولتاژ متفاوت ممکن است باعث ایجاد خطر شوک الکتریکی و آتش سوزی شود.
اگر دستگاه به یکباره خاموش شود	بمنظور حفظ سلامت دستگاه، برق را قطع کنید و ۲ شاخه را از برق بکشید.
در زمان استفاده از دستگاه با مشکل روبرو شدید	دو شاخه را از برق بکشید و با فروشنده تماس حاصل فرمایید.
وقتی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید.	لطفاً برق را قطع کنید و ۲ شاخه را از برق بکشید.
وقتی سیم یا دو شاخه برق آسیب دیده است	بمنظور جلوگیری از بروز خطر، صبر کنید تا بخش آسیب دیده توسط پرسنل نگهداری تعویض گردد.

توجه

- بیش از ۳۰ دقیقه از دستگاه استفاده نکنید.
- استفاده طولانی باعث بروز دردهای عضلانی و عصبی می‌شود.
- ۱. اگر دچار یکی از حالت‌های زیر هستید با پزشک قبل از استفاده مشورت نمایید :
- بیماری قلبی دارید.
- به تازگی عمل جراحی داشته‌اید.
- اگر از دستگاه ضربان ساز قلب و یا سایر دستگاه‌های پزشکی داخل بدن استفاده می‌کنید.
- دارای آسیب و یا شکستگی استخوان هستید.
- در دوران حاملگی و یا بعد از زایمان هستید.

- از پوکی استخوان رنج می‌برید.
- دچار مشکل گردش خون و یا گرفتگی رگ‌های خونی هستید.
- عفونت پوستی دارید.
- تحت درمان و یا درمان‌های کمکی هستید.
- بدنتان دارای بیماری غیر معمولی هست.
- ۲. در حالی که پوشش بیرونی آسیب دیده و یا بخش مکانیکی و الکترونیکی دارای نقص هستند از ماساژور استفاده نکنید. لطفاً با بخش فنی تماس حاصل فرمایید.
- ۳. لطفاً در مکان‌های خیس و یا دمای بالا و یا هر جایی که تجهیزات گرمایشی از قبیل

سوزی شود. مراقب باشید در حال استفاده از ماساژور خوابتون نبرد و در صورت داشتن تب از ماساژور استفاده ننمایید.

۱۴. جانمایی ماساژور باید بر اساس این دفترچه راهنما باشد.

۱۵. از ماساژور بعنوان تجهیزات بیمارستانی استفاده ننمایید.

۱۶. هنگامی که به برق متصل است دستگاه را ترک نکنید.

۱۷. بمنظور جلوگیری از تغییر رنگ، تغییر شکل، ترک و یا شکستگی، ماساژور را در مکان هایی که در مجاورت مواد خورنده از قبیل گاز، تینر، الکل و سفید کننده قرار ندهید.

۱۸. این محصول برای افراد معلول و یا کسانی که اختلال حس گری و یا مغز و اعصاب دارند و یا افرادی که عدم تجربه و یا دانش دارند مناسب نیست. (همچنین کودکان)

۱۹. از تماس مستقیم با پوست خودداری فرمایید.

۲۰. به کودکان اجازه بازی با ماساژور را ندهید.

۲۱. این ماساژور مجهز به سیستم گرمایشی است. لطفا اگر به حرارت حساس نیستید نسبت به این عملکرد توجه ویژه داشته باشید.

هیتر برقی و کوره وجود دارند استفاده ننمایید.

۴. از مالیدن مواد آرایشی و بهداشتی بر روی ماساژور قبل از استفاده و یا در حین استفاده خودداری فرمایید.

۵. اجازه تعمیر دستگاه به شخصه را ندارید، برای رفع مشکل فنی، دستگاه را به مرکز خدمات فنی بفرستید، در غیر اینصورت دستگاه از گارانتی خارج می شود.

۶. از انداختن و یا تکان دادن سنگین دستگاه خودداری فرمایید.

۷. از پیچیدن سیم به دور ماساژور و یا قرار دادن آن بین پا بمنظور جلوگیری از خطر خودداری فرمایید.

۸. از ایستادن بر روی ماساژور و یا قراردادن اجسام سنگین بر روی آن خودداری فرمایید.

۹. در صورت مشاهده هر گونه ایراد با بخش فنی تماس حاصل فرمایید.

۱۰. بمنظور جلوگیری از آسیب، اجازه گرفتن و یا ضربه زدن به گوی های ماساژ دهنده در حال استفاده را ندارید.

۱۱. لطفا از استفاده ماساژور در مکان های مرطوب و خیس از قبیل حمام و یا استخر بمنظور جلوگیری از بروز خطر پرهیز کنید.

۱۲. بمنظور جلوگیری از ایجاد خطر، اگر سیم برق دچار آسیب شد منتظر پرسنل فنی برای تعویض سیم بمانید.

۱۳. از آسیب رساندن، خم کردن، تا کردن، کشیدن، گره زدن و یا جدا سازی و یا قرار دادن سیم برق زیر اجسام سنگین خودداری فرمایید چون ممکن است باعث ایجاد آتش

ساختار محصول

مکانیزم منحصر به فرد بالابرنده، می تواند برای رضایت افراد با قدهای مختلف تا ۷ سانتیمتر افزایش ارتفاع پیدا کند.

۴. ماساژ کامل فشار کیسه هوا برای پا

۲۶ کیسه هوای ماساژ دهنده که توانایی تشخیص ماساژ کامل برای جلوی پا، پشت و کناره های پا را دارد و ۳ سطح قدرت ماساژ می تواند تمام احتیاجات افراد مختلف را برطرف کند.

۵. مکانیزم ماساژ ۳ بعدی همانند دست انسان در مرکز

مکانیزم جدید ماساژ، پا را همانند دست انسان با فشار بر نقطه طب سوزنی ماساژ می دهد.

آماده سازی قبل از استفاده

۱. مکان مناسب


لطفاً ماساژور را در جای خشک بدون قرار گرفتن در معرض نور طولانی قرار دهید. بمنظور کاهش صدای ماساژور در هنگام کارکرد (نویز) از یک فرش زیر ماساژور استفاده نمایید.

۲. برق را وصل کنید

دو شاخه را به برق وصل کنید.

مطمین شوید سیم برق در سلامت کامل قرار دارد. مطمین شوید قبل از روشن کردن دستگاه سوییچ روشن/خاموش در وضعیت خاموش باشد.

با دست خیس سیم را لمس نکنید.

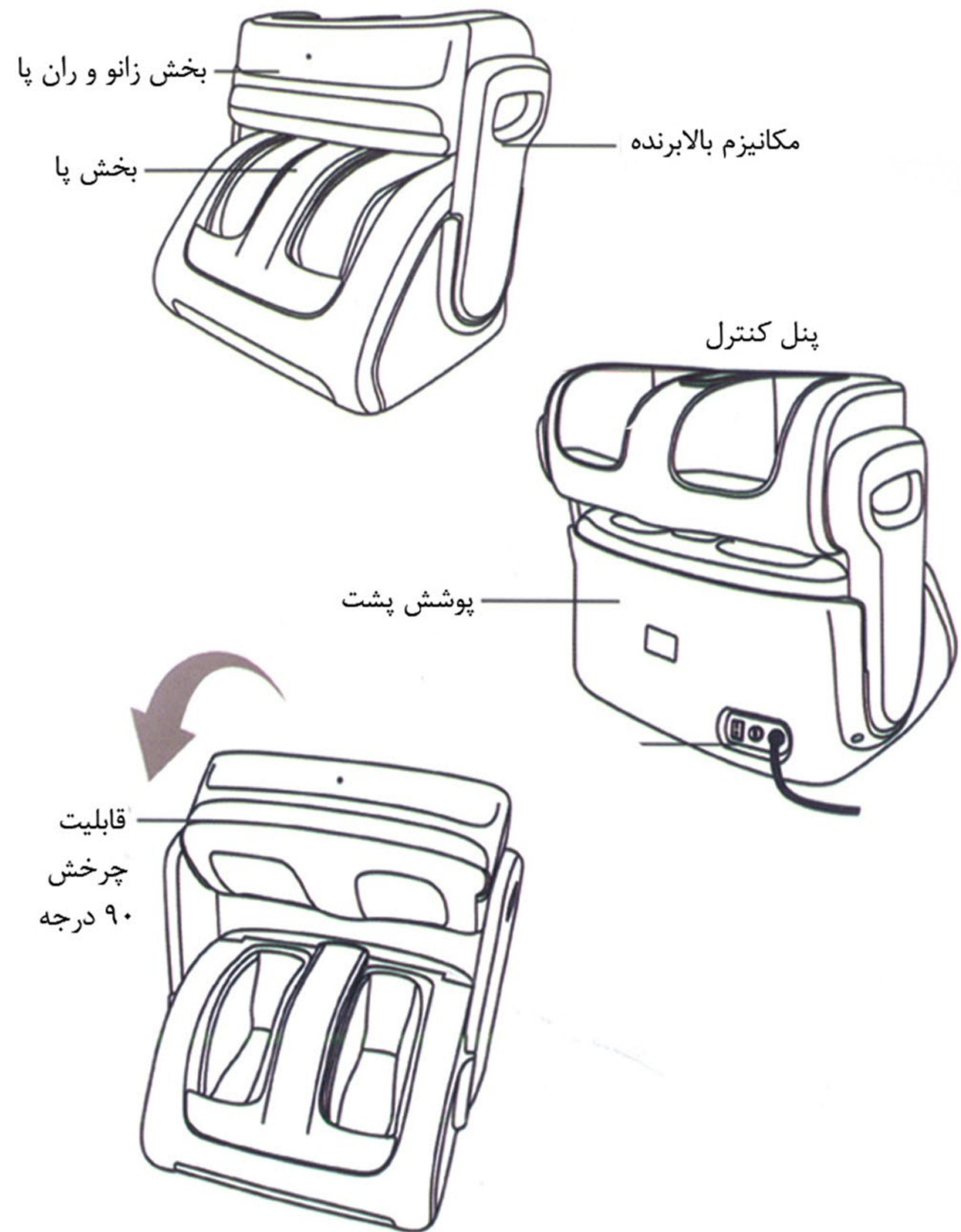

ویژگی های محصول

۱. محافظت ۳۶۰ درجه برای زانوی شما

طراحی منحصر به فرد خلاقانه برای محافظت ۳۶۰ درجه زانو، می تواند ماساژ و درمان حرارتی برای جلو، پشت، چپ و راست را تشخیص دهد. می تواند خستگی را کاهش دهد و محافظت موثر مفصل های زانو را بهبود ببخشد.

۲. طراحی چرخشی پاها


طراحی منحصر به فرد چرخشی پاها که تاثیر بسزایی در مراقبت کامل پاها دارد، می تواند ماساژ کامل بر روی پا و زانو را انجام دهد.

۳. بخش پایینی می تواند بالا یا پایین

رود

روش استفاده

۱. شاخه را به پریز وصل کنید.
۲. سویچ را که در کنار کاور پشتی قرار دارد باز کنید. زمانی که دستگاه روشن است چراغ سویچ کنترل پنل چشمک می زند.
۳. دکمه on-off را روشن کنید. چراغ شروع به چشمک زدن می کند.
۴. فریم پشتیبانی ماساژور را بلند کنید و پاها را داخل ماساژور بگذارید.
۵. برنامه دلخواه برای ماساژ را انتخاب کنید.

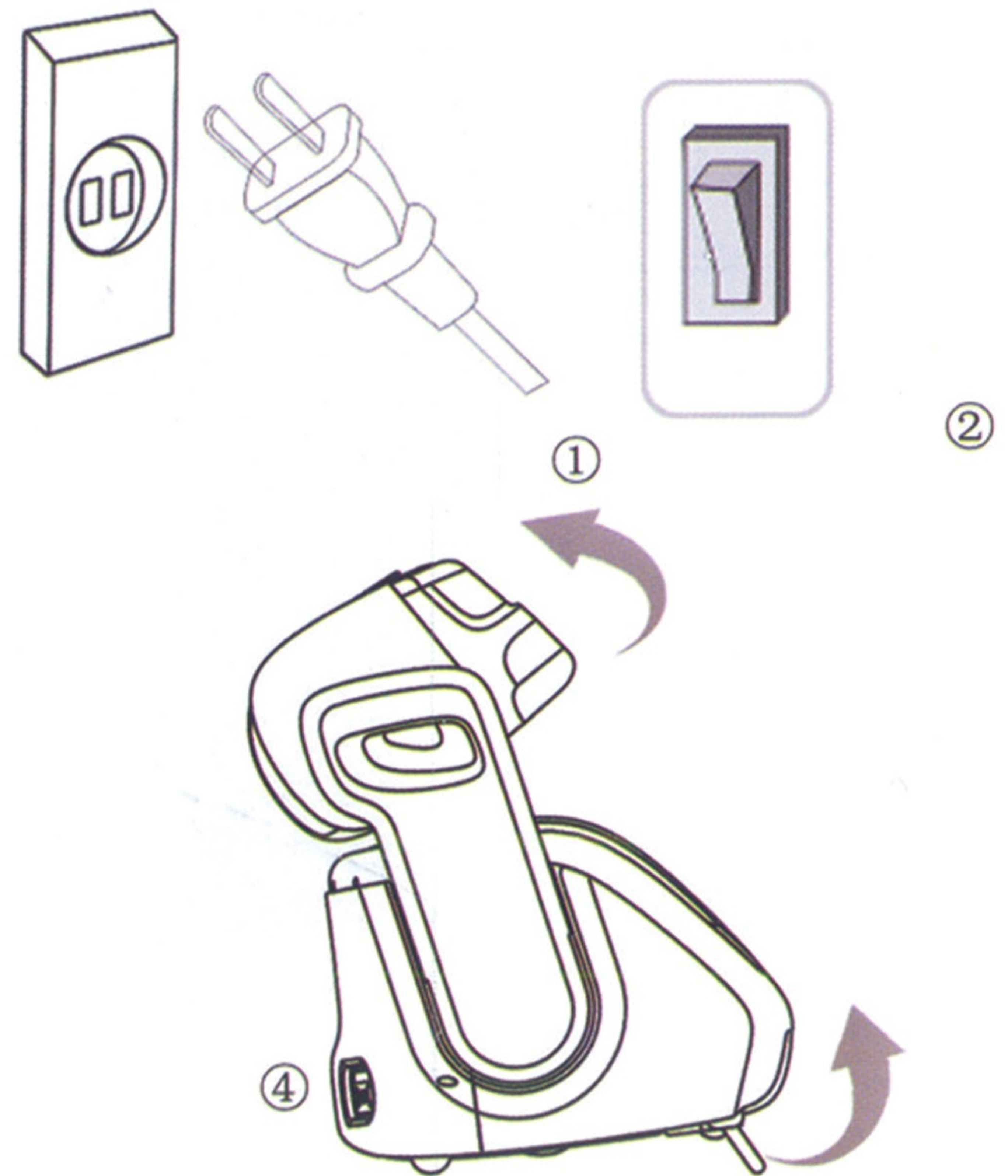

روش استفاده از ریموت کنترل

- دستورالعمل دکمه های ریموت کنترل
- کلید **Auto 1**: کلید Auto 1 را فشار دهید: گرمایش (چراغ روشن است)، گوی ها ماساژ کار می کند (چراغ گوی های ماساژ دهنده

روشن است) چراغ تنظیم قدرت روشن است
نکته: این برنامه برای حالتی که فریم پشتیبانی باز نیست مناسب است.

- بخش پا
- کلید گرمایش: بمنظور کنترل عملکرد گرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد. لطفا این دکمه را فشار دهید. زمانی که چراغ قرمز را نشان می دهد گرمایش در بالاترین حالت و زمانی که سبز است در پایین ترین حالت قرار دارد.

- بالا: مداوم این کلید را فشار دهید، این کلید ارتفاع مناسب برای زانو را فراهم می کند. مداوم فشار دهید و زمانی که به ارتفاع مناسب برای زانو ها رسیدید کلید را رها کنید.

- کلید **on-off**: فشار دهید، چراغ شروع به چشمک زدن می کند، مجددا فشار دهید، چراغ ثابت می شود. سپس می توانید هر برنامه ماساژی را که می خواهید انتخاب کنید. مجددا فشار دهید، چراغ شروع می کند به چشمک زدن و دستگاه خاموش می شود.

- کلید **Auto 2**: کلید Auto 2 را فشار دهید، گرمایش (چراغ گرمایش روشن است)، گوی های ماساژ کار می کند (چراغ روشن است) چراغ قدرت روشن است. نکته: این برنامه برای حالتی که فریم پشتیبانی باز است مناسب است.

- بخش پا: کلید برای ماساژ پا - گرمایش در حین ماساژ پا.
- گوی های ماساژ: خاموش یا روشن کردن

راهنمای ریموت کنترل

بمنظور عملکرد بهتر، ریموت را به وسط ماساژور در فاصله ۲ متری پایی بگیرید. (بدلیل اینکه سنسور اینفرارد در مرکز پایی تعبیه شده است.)

لطفا قبل از استفاده داخل ریموت کنترل باتری بگذارید. در صورت استفاده نشدن به مدت طولانی باتری جدید جایگزین کنید.

نکته :

۱. توجه فرمایید تمامی دکمه ها و عملکرد ریموت کنترل ها بغیر از دکمه توقف یکسان می باشد.

۲. وجود ریموت کنترل ضروری است.




دکمه توقف : فشار دادن دکمه توقف باعث متوقف شدن دستگاه و فشار مجدد باعث ادامه دستگاه می شود.

گوی های ماساژ دهنده.

- قدرت : بمنظور تنظیم قدرت کیسه های هوا استفاده می شود. زمانی که ماساژور در حال کار کردن است این دکمه را فشار دهید. زمانی که چراغ قرمز را نشان می دهد گرمایش در بالاترین حالت و زمانی که سبز است در پایین ترین حالت قرار دارد.

- پایین : کلید را مداوم فشار دهید، زانویی بصورت مداوم پایین می آید، کلید را رها کنید تا متناسب با ارتفاع شما متوقف شود.

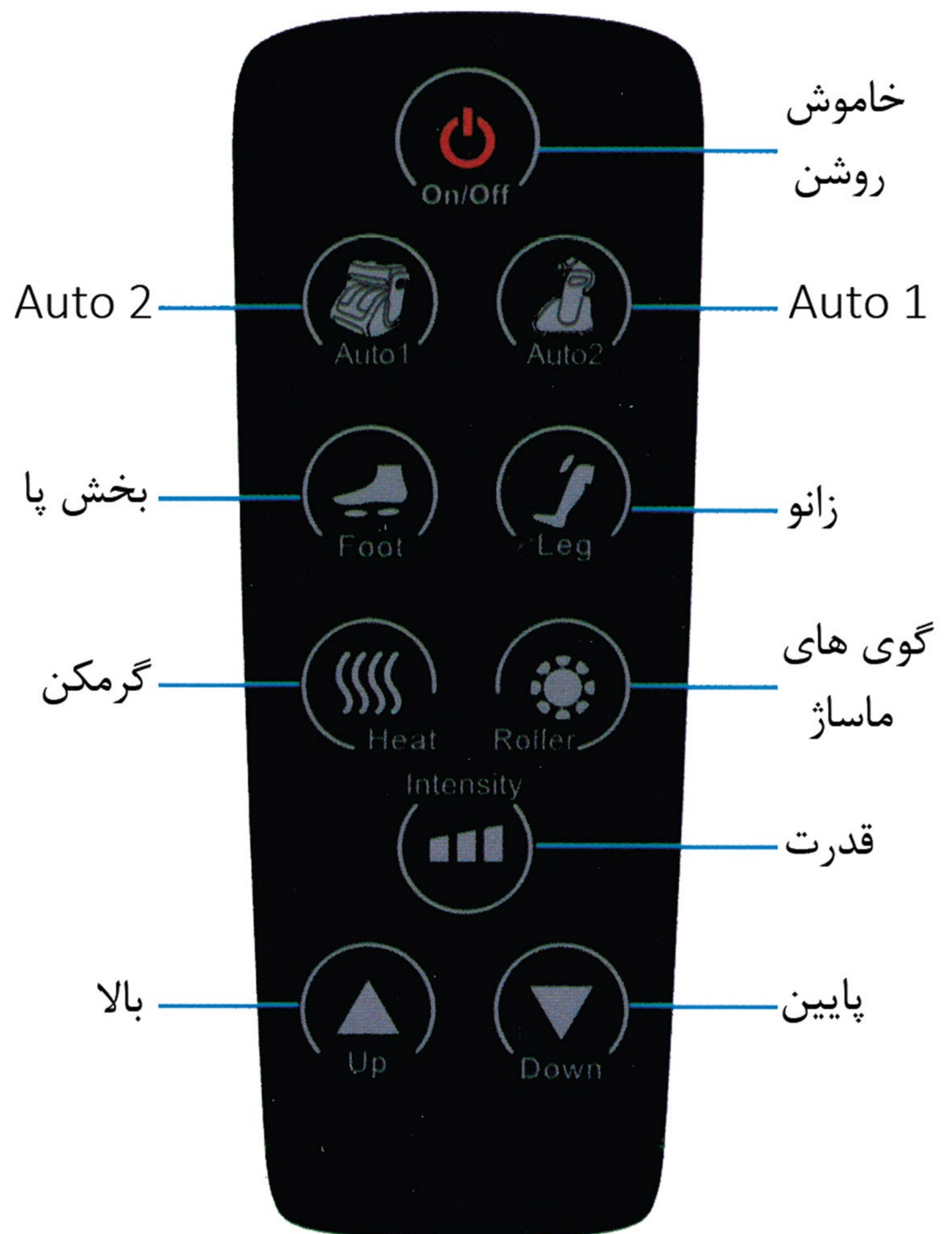

خاموش روشن

Auto 2

Auto 1

بخش پا

زانو

گرمکن

گوی های ماساژ

قدرت

بالا

پایین

نگهداری

هشدار

در هنگام نگهداری و تمیزکاری لطفا دستگاه را خاموش نمایید و از ۲ شاخه جدا فرمایید. بعد از استفاده اگر ماساژور لک شد با استفاده از یک پارچه نم دار حاوی مواد شوینده خنثی ماساژور را تمیز کنید. (به هیچ وجه از مواد شیمیایی از قبیل بنزین، الکل و تینر جهت تمیز کردن سطح خارجی ماساژور استفاده ننمایید.) سپس با استفاده از یک دستمال خشک آن را تمیز کنید و اجازه دهید بصورت طبیعی خشک شود. (به هیچ وجه از روش های سریع خشک کردن برای خشک کردن ماساژور استفاده ننمایید.)
محل ایمن برای استفاده و نگهداری

لطفا تحت شرایط زیر نگهداری شود :
دما : بین ۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد
رطوبت : بین ۳۰ تا ۸۵ درصد بدون مه

لطفا توجه فرمایید : در مکان های خیس و یا دمای بالا قرار ندهید. در مکان هایی که دارای گازهای خورنده هستند قرار ندهید. خیلی نزدیک به اجسام حرارتی قرار ندهید. در معرض مستقیم نور خورشید قرار ندهید.

عیب یابی

عیب	علت	راه حل
خوب کار نمی کند	سیم برق به درستی متصل نیست	لطفا سیم را متصل نمایید
	سوئیچ کنار کاور پشتی باز نیست	لطفا سوئیچ کنار کاور پشتی را روشن کنید
بعد از روشن کردن سوئیچ کنار کاور پشتی دستگاه روشن نمی شود و چراغ چشمک نمی زند	فیوز سوخته است	فیوز را تعویض نمایید
صدای شدید در هنگام ماساژ	استفاده بلند مدت	دستگاه ۱ بمدت ۱ ساعت خاموش کنید و مجددا روشن کنید.
احساس گرما در سطح ماساژور	استفاده بلند مدت	به مدت ۳۰ دقیقه الی ۱ ساعت از ماساژور استفاده ننمایید.
در صورت مشاهده هر گون ایراد فنی که در بالا ذکر نشده بود با فروشنده و یا بخش فنی تماس حاصل فرمایید		



ساختار محصول

ماساژور پا	
وزن خالص : ۲۳ کیلوگرم	مدل : RK۸۵۸ / RK۸۵۸A
فرکانس : ۵۰ هرتز	ولتاژ : AC۱۰۰V-۱۱۰V, AC۱۲۰V ۶۰Hz AC220V 50/60Hz, AC240V 50Hz

۲ مدل وجود دارد : RK858، RK858A و RK858 برای پاهای ۲۷ سانتیمتر مناسب است. اگر پاهای شما بیشتر از ۲۷ سانتیمتر بود لطفاً RK858A را انتخاب کنید. لطفاً بر اساس شرایط اساسی انتخاب کنید.



شرکت نیکان آسا پرشین
نماینده انحصاری محصولات بست رست در ایران

BESTREST

تجربیش - خ غلام جعفری - مجتمع تندیس - ط ۶ شرقی - واحد ۶۰۷
No 607, 6th East Floor, Tandis Building, Jafari St., Tajrish Sq.

 @bestrestmassage

 bestrestmassagechair

www.nikanasa.ir

 22 74 98 39-40



www.nikanasa.com