


BESTREST

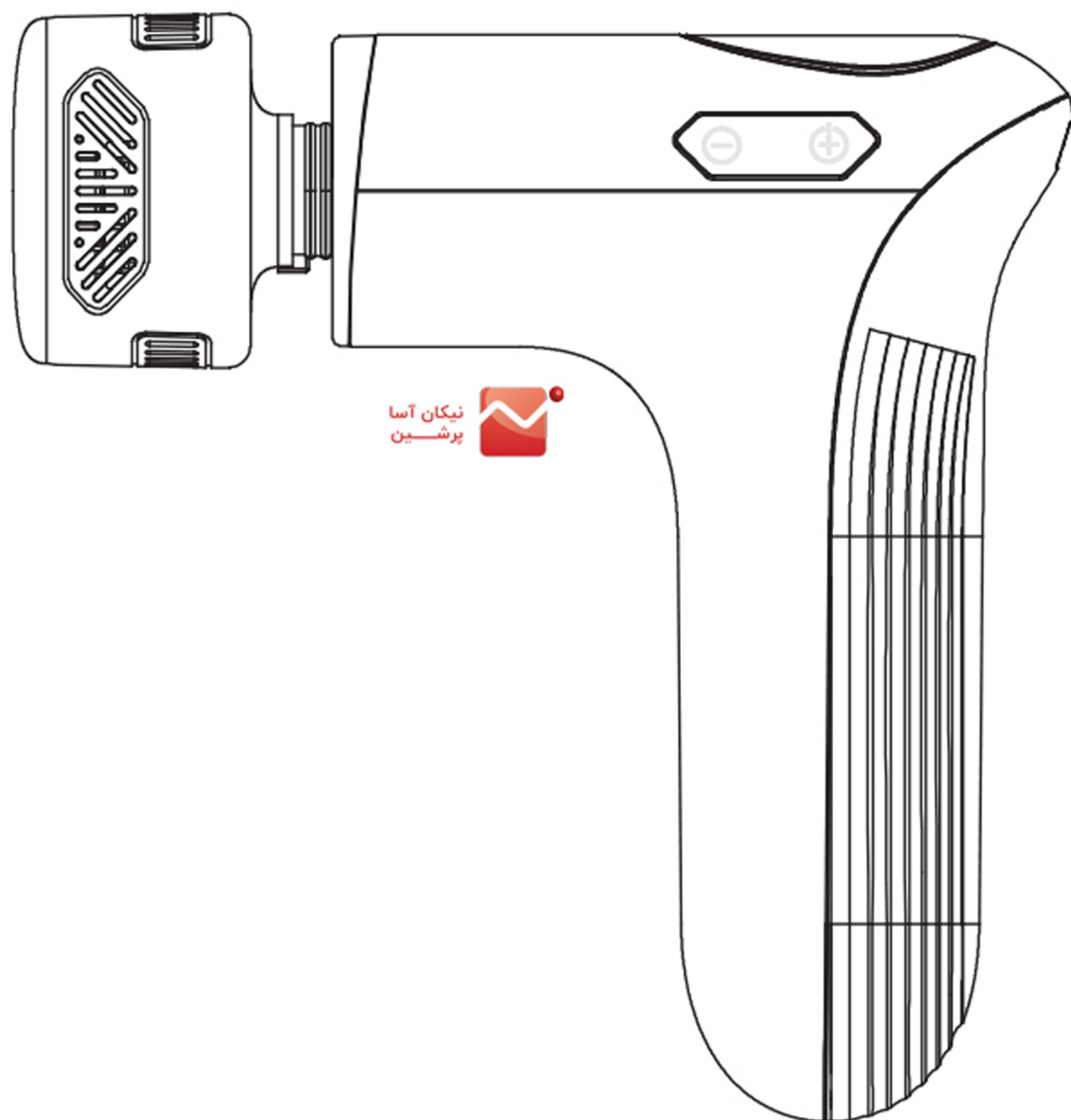

نیکان آسا
پرشین

مینی ماساژور تفنگی سرد و گرم

دفترچه راهنمایی مدل BR-310


از خرید محصولات ما سپاسگزاریم. قبل از استفاده، لطفاً این دفترچه را با دقت مطالعه کنید تا از استفاده صحیح اطمینان حاصل شود. لطفاً این دفترچه را برای مراجعات بعدی به درستی نگهداری کنید.

1 معرفی و کاربرد تفنگ ماساژ:

• تفنگ ماساژ حرارتی دستگاهی برای ریلکس کردن عمیق فاسیای عضلانی است که برای ماساژ فیزیکی پس از ورزش و تناسب اندام مناسب است. این دستگاه می‌تواند سفتی و درد عضلات را کاهش دهد، خستگی عضلانی را رفع کند و گردش خون را تسریع بخشد تا سلامت بافت نرم را بهبود دهد.

هدف

• تفنگ ماساژ حرارتی برای ماساژ فیزیکی و مراقبت‌های زیبایی پوست (اسپا) قبل / بعد از ورزش و تناسب اندام مناسب است.

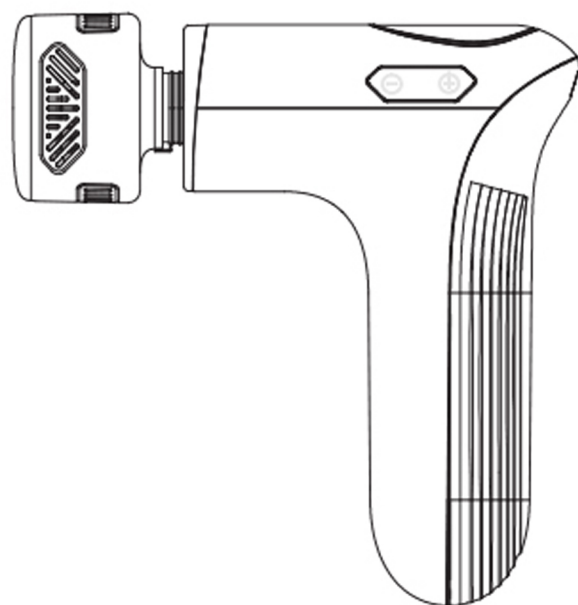

تفنگ ماساژ HXR-B510 | استاد مراقبت از سلامتی شما.

اطلاعات مهم

به منظور کاهش خطر خرابی، برق‌گرفتگی، جراحت، آتش‌سوزی، مرگ و آسیب به تجهیزات، لطفاً قبل از استفاده از محصول، تمامی دستورالعمل‌ها و هشدارهای مربوط به محصول را در این دفترچه با دقت مطالعه کنید.

⚠ ممنوعیت‌ها

1. استفاده برای افراد زیر سن قانونی ممنوع است. اگر مصدوم هستند، استفاده از این دستگاه ممنوع است. در صورت آسیب عضلانی قبل از استفاده با پزشک مشورت کنید.
2. استفاده روی سطح پوست غیر خشک و کثیف ممنوع است. می‌توان روی لباس استفاده کرد. هر قسمت را به آرامی روی پوست فشار دهید و حدود 60 ثانیه حرکت دهید.
3. در آب غوطه‌ور نکنید و اجازه ندهید آب وارد سوراخ تهویه محصول شود.
4. قرار دادن هرگونه شیء در سوراخ تهویه محصول ممنوع است.
5. انداختن محصول در آتش یا قرار دادن نزدیک منبع آتش ممنوع است.
6. انداختن عمدی محصول به زمین ممنوع است.
7. تغییر یا اصلاح محصول به هر شکلی ممنوع است.
8. روشن گذاشتن یا شارژ کردن محصول بدون نظارت ممنوع است.
9. انگشتان، مو یا سایر قسمت‌های بدن نباید به محور و پشت سری ماساژ نزدیک شوند تا از آسیب‌گیر کردن (نیشگون گرفتن) جلوگیری شود.
10. استفاده برای کودکان زیر 8 سال ممنوع است. کودکان نباید بدون نظارت از محصول استفاده، تمیز یا نگهداری کنند.
11. تجهیزات دارای عملکرد گرمایش و سرمایش است، بنابراین افرادی که به گرما و سرما حساس نیستند باید با احتیاط از آن استفاده کنند.



هنگام روشن کردن دستگاه با سری نصب شده، این ناحیه را لمس نکنید تا از گیر کردن پوست جلوگیری شود.



پس از نصب سری ماساژ و هنگام روشن کردن، این ناحیه را لمس نکنید تا از گیر کردن پوست جلوگیری شود.

2. هشدار پزشکی


در صورت داشتن هر یک از شرایط زیر، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت کنید:

01. مادران باردار و بیماران سرطانی
02. بیماری قلبی، استفاده از ضربان ساز قلب یا دفیبریلاتور
03. جراحی‌های اخیر
04. آنوریسم، خونریزی، استفاده از رقیق‌کننده‌های خون
05. تفاوت‌هایی در نواحی حساس، سر یا استخوان‌های مفصلی
06. عوارض ناشی از سایر بیماری‌ها (مانند نوروپاتی و غیره)





3. احتیاط‌های استفاده

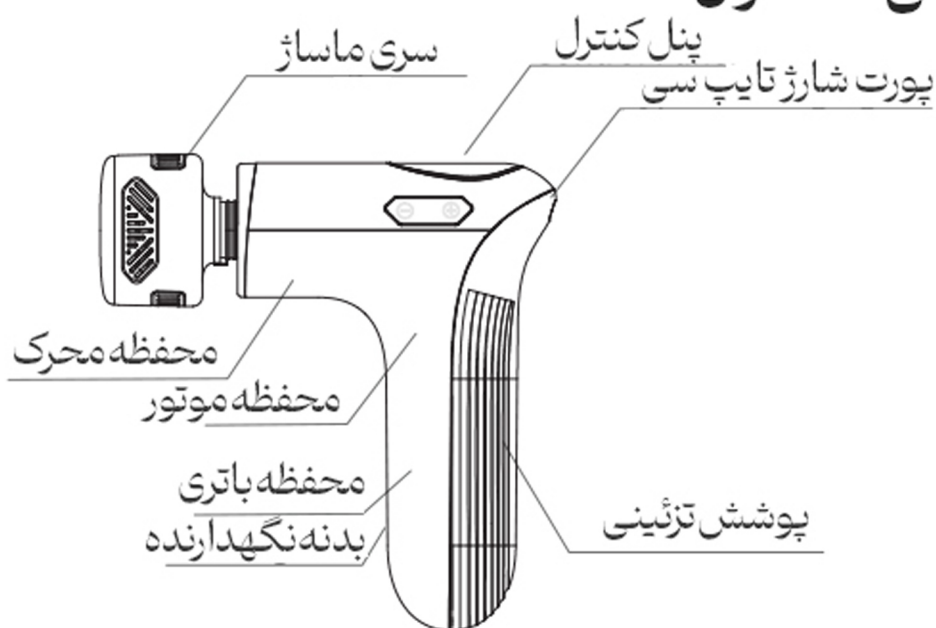01. پس از شارژ، شارژر را از برق بکشید.
02. استفاده از این محصول در حالت شارژ ممنوع است.
03. لطفاً طبق دستورالعمل‌ها از محصول به درستی استفاده کنید.


1. معرفی محصول



معرفی سری های ماساژ

- سری ماساژ گرم و سرد: عمدتاً برای ریلکس کردن کل بدن و زیبایی و فرم دهی پوست استفاده می شود. 
- سری کروی: عمدتاً برای گروه های عضلانی بزرگ استفاده می شود. 
- سری استوانه ای: عمدتاً برای ضربه زدن به بافت های عمیق استفاده می شود. 
- سری U شکل: عمدتاً برای دو طرف گردن و ستون فقرات استفاده می شود. 

2: روش استفاده

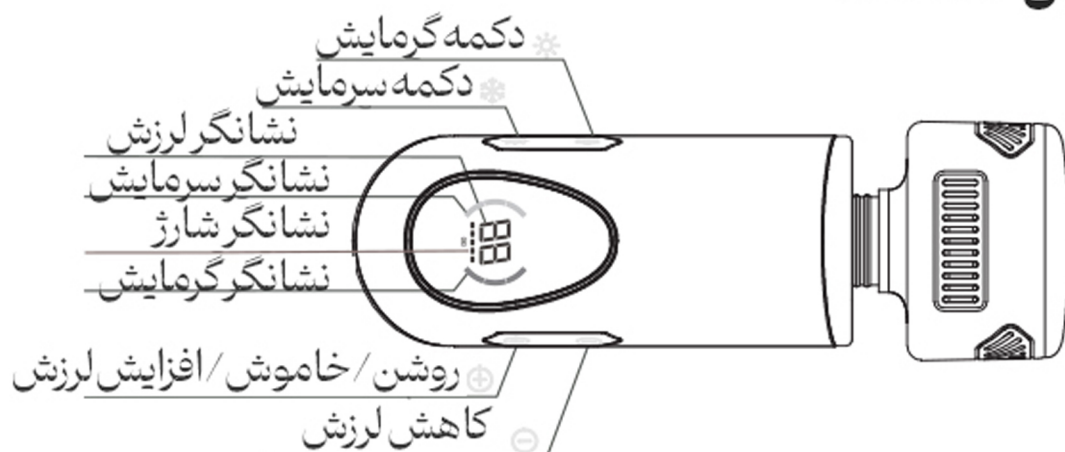

1. وقتی تفنگ ماساژ خاموش است، کلید "+" را به مدت 2 ثانیه نگه دارید تا روشن شود. در این حالت شدت صفر است. در مجموع 10 درجه شدت وجود دارد؛ با فشار کوتاه کلید "+" شدت را افزایش و با فشار کوتاه کلید "-" شدت را کاهش دهید.
2. وقتی تفنگ ماساژ روشن است، دکمه "+" را 2 ثانیه نگه دارید تا خاموش شود.
3. وقتی سری ماساژ سرد و گرم نصب شده است، کلید |خورشید| را کوتاه فشار دهید تا عملکرد کمپرس گرم روشن شود (دارای 3 درجه: 35، 40 و 45 درجه سانتی گراد). با ادامه فشار دادن، درجه تغییر می کند. کلید |برف| را کوتاه فشار دهید تا کمپرس سرد روشن شود (دارای 3 درجه: 20، 15 و 10 درجه سانتی گراد). با ادامه فشار دادن، درجه تغییر می کند.
- نکته: عملکردهای بالا فقط زمانی قابل استفاده هستند که سری ماساژ سرد و گرم نصب شده باشد.
4. عملکردهای لرزش، گرمایش و سرمایش همگی می توانند به صورت جداگانه استفاده شوند.
5. تایمر خودکار برای عملکردهای لرزش، گرمایش و سرمایش همگی 10 دقیقه است.
- نکته: سرعت دنده‌های تفنگ ماساژ در حالت نصب سری سرد و گرم با سایر سری‌ها متفاوت است. داده‌های دقیق به شرح زیر است:


	برای سری سرد و گرم	برای سایر سری‌ها
Speed 1	1100	1200
Speed 2	1200	1400
Speed 3	1350	1600
Speed 4	1500	1800
Speed 5	1650	2000
Speed 6	1800	2200
Speed 7	1950	2400
Speed 8	2100	2600
Speed 9	2250	2800
Speed 10	2400	3000

نصب سری ماساژ




1. باز و بسته کردن سری ماساژ به صورت فشاری (خطی) است و نیاز به پیچاندن ندارد.
2. خط صاف قرمز رنگ روی سری سرد و گرم باید با شکاف پیستون هم‌راستا باشد.
3. مطمئن شوید که آن را تا انتها فشار دهید.

[تصویر نصب سری سرد و گرم]

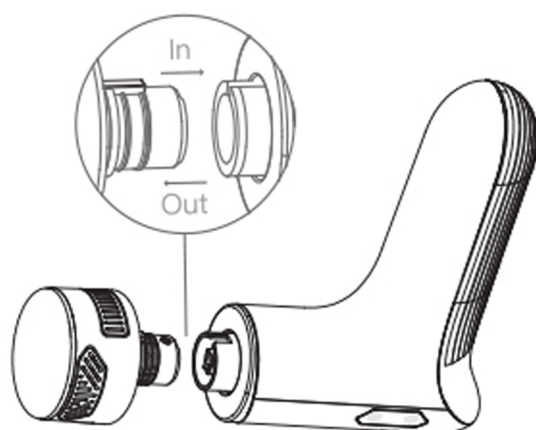

شارژ کردن:

پورت شارژ در قسمت بالای محصول قرار دارد.

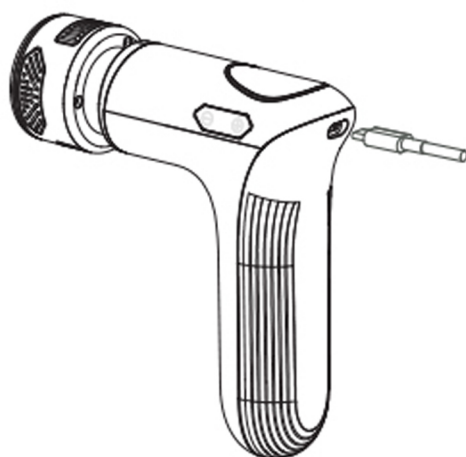

01. قبل از اولین استفاده حدود 4 ساعت شارژ کنید تا باتری کاملاً پر شود.
02. برای شارژ، یک کابل USB مخصوص ارائه شده است که به سوکت تایپ سی دستگاه متصل می‌شود و سر دیگر آن به هر شارژر 5 ولتی متصل می‌گردد (5 ولت، 2 آمپر توصیه می‌شود).
03. نشانگر نیرو روی صفحه LED تفنگ ماساژ نوری متحرک را نشان می‌دهد که بیانگر در حال شارژ بودن است.
04. وقتی تمام چراغ‌های نشانگر نیرو روی دستگاه از چشمک زدن ایستادند و ثابت ماندند، نشان دهنده شارژ کامل است.
05. باتری را می‌توان در هر زمان و در هر سطح انرژی تحت شرایط محیطی مشخص شارژ کرد.
06. وقتی شارژ کمتر از 20% است، باید فوراً شارژ شود.
07. میانگین زمان کارکرد دستگاه پس از شارژ 5 ساعت است که به فرکانس لرزش و فشار اعمال شده در حین استفاده بستگی دارد.

پارامترهای اساسی

مدل محصول: BR-310	نام محصول: مینی ماساژور تفنگی سرد و گرم
ولتاژ ورودی: 5 ولت، 2 آمپر	وزن خالص: 487 گرم
مشخصات باتری: 7.4 ولت، 2200 میلی آمپر ساعت	توان: 20 وات (حداکثر 55 وات)
زمان شارژ: حدود 3-2 ساعت	دنده سرعت: تنظیم 10 سرعته
ابعاد محصول: 150 × 50 × 160 میلی متر	محیط سرویس: 0 تا 40 درجه سانتی گراد
زمان بندی خودکار: لرزش 10 دقیقه، گرمایش یا سرمایش 10 دقیقه	مدت زمان کارکرد لرزش: حدود 2 تا 2.5 ساعت مدت زمان گرمایش: حدود 5 تا 6 ساعت مدت زمان سرمایش: حدود 1 تا 1.5 ساعت

مقادیر دما:

گرمایش: دنده اول 35 درجه، دنده دوم 40 درجه، دنده سوم 45 درجه.

سرمایش: دنده اول 20 درجه، دنده دوم 15 درجه، دنده سوم 10 درجه.

انحراف مقادیر بالا بسته به محیط و شرایط استفاده مثبت یا منفی 5 درجه سانتی گراد خواهد بود.

3. مشکلات رایج

روشن نمی شود:

1. گرمای بیش از حد:

اگر تفنگ ماساژ در محیطی بالای 40 درجه سانتی گراد استفاده شود، ممکن است محافظ گرمای بیش از حد فعال شود و دستگاه به طور عادی روشن نشود.
راه حل: به مدت 2 ساعت در محیطی زیر 40 درجه بی حرکت بماند، سپس روشن کنید.

2. سطح باتری "0" است:

وقتی باتری خالی است، اگر کاربر برای مدت طولانی آن را شارژ نکند، باتری وارد حفاظت کم مصرف می شود (حفاظت تخلیه بیش از حد). در این زمان تفنگ ماساژ کار نمی کند.

راه حل: دستگاه را خاموش نگه دارید، شارژر را وصل کنید تا وارد حالت شارژ شود، پس از شارژ کامل شارژر را جدا کنید و سپس دستگاه را روشن کنید.
شارژ نمی شود:

1. دمای تفنگ ماساژ خیلی بالا است:

اگر دمای بدنه اصلی خیلی بالا باشد، هنگام اتصال به شارژر شارژ نمی شود.
راه حل: 2 ساعت در محیط زیر 40 درجه بماند، سپس شارژ کنید.

2. دمای شارژر خیلی بالا است:

اگر در محیط بالای 40 درجه شارژ شود، ممکن است شارژر وارد حالت حفاظت گرمایشی شود.

راه حل: پس از 2 ساعت ماندن در محیط زیر 40 درجه، آن را شارژ کنید.

عیب‌یابی عملکرد تفنگ

شرح خطا	عیب‌یابی
1. سری ماساژ بیرون می‌لغزد و می‌افتد	بررسی کنید که آیا سری ماساژ به درستی در جای خود نصب شده است (برای عملکرد خاص به صفحه 7 مراجعه کنید).
2. محصول روشن نمی‌شود	بررسی کنید که آیا شارژ کافی است (اگر مدت طولانی استفاده نشده، بیش از 6 ساعت شارژ کنید).
3. محصول شارژ نمی‌شود	بررسی کنید که آیا پورت شارژ به درستی متصل شده است.
4. توقف ناگهانی پس از 10 دقیقه کار مداوم	این پدیده تنظیم عملکرد محافظت از کار طولانی مدت است. تغییر از حالت کار به حالت آماده‌به‌کار طبیعی است؛ با فشار کوتاه کلید دوباره راه‌اندازی کنید.
5. عملکرد کوبشی پس از مسدود شدن سری ماساژ متوقف می‌شود	این پدیده تنظیم عملکرد محافظت از عملکرد غیرعادی است. تغییر به حالت آماده‌به‌کار طبیعی است؛ با فشار کوتاه کلید دوباره راه‌اندازی کنید.

1. بازیافت

در پایان عمر مفید محصول، آن را همراه با زباله‌های عمومی خانگی دور نریزید. محصول باید در سطل بازیافت تعیین شده توسط دولت قرار گیرد، یا می‌توان آن را به مرکز خدمات پس از فروش کارخانه اصلی بازگرداند. پرسنل مرکز خدمات به شیوه‌ای سازگار با محیط زیست با آن برخورد خواهند کرد.

1. نگهداری، تمیز کردن، انبارداری و حمل و نقل

01. لطفاً دستگاه را با حوله‌ای کمی مرطوب تمیز کنید و با پارچه‌ای نرم و خشک، خشک نمایید.
02. اگر دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی‌شود، لطفاً آن را در جعبه بسته‌بندی نگهداری کنید.
03. هنگامی که دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی‌شود، لطفاً باتری را ماهی یک بار شارژ کنید.
04. دستگاه ماساژ باید در انباری با تهویه مناسب و بدون گازهای خورنده، در ارتفاع 250 میلی‌متری از سطح زمین نگهداری شود.
05. چیدن دستگاه‌های ماساژ روی هم در بیش از 5 لایه اکیداً ممنوع است.
06. هنگامی که دستگاه ماساژ برای مدت طولانی استفاده نمی‌شود، لطفاً پس از تمیز کردن بسته‌بندی و انبار کنید. بهتر است ماهی یک بار آن را خارج کرده و شارژ کنید تا از رطوبت جلوگیری شود.
07. این محصول برای حمل و نقل با خودرو، قطار، کشتی و هواپیما مناسب است.
08. در حین حمل و نقل، محصولات باید ثابت شوند تا از لرزش شدید، برخورد، غلتیدن و سقوط جلوگیری شود و باید جهت آن رو به بالا باشد، با احتیاط حمل شود و ضد باران باشد.