

# ماساژور گردن و شانه سه بعدی شیاتسو همراه با گرما



دستورالعمل های راه اندازی

قبل از استفاده دستورالعمل ها را مطالعه کنید.



1-4

هشدارها و احتیاط‌ها:

5

محل قطعات و کنترل‌ها:

6

مراقبت و نگهداری محصول:

6

مشخصات:

## هشدار

فقط برای استفاده بزرگسالان

مهم: هر فردی که ممکن است باردار باشد، دارای ضربان ساز قلب (باتری قلب) باشد، از دیابت، فلبیت (التهاب ورید) و/یا ترومبوز (لخته شدن خون) رنج می برد، در معرض خطر افزایش یافته ای برای ایجاد لخته خون است، یا دارای پین / پیچ / مفاصل مصنوعی یا سایر دستگاه های پزشکی کاشته شده در بدن خود می باشد، باید قبل از استفاده از دستگاه ماساژ خانگی با پزشک مشورت کند.

دماهای به اندازه کافی بالا برای ایجاد سوختگی ممکن است رخ دهد، صرف نظر از تنظیمات کنترل.

- روی نوزاد، فرد ناتوان، یا فردی که خواب یا بیهوش است استفاده نکنید.
- روی پوست بی حس یا روی شخصی با گردش خون ضعیف استفاده نکنید.
- پوست در تماس با ناحیه گرم شده دستگاه را مرتباً بررسی کنید تا خطر تاول زدن کاهش یابد.

## احتیاط

- برای کاهش خطر برق گرفتگی، پوشش دستگاه را برندارید. هیچ قطعه قابل تعمیری در داخل وجود ندارد.
- برای کاهش خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

⚡ نماد رعد و برق با سر پیکان در داخل یک مثلث متساوی الاضلاع به منظور هشدار به کاربر در مورد وجود "ولتاژ خطرناک" عایق بندی نشده در داخل محفظه دستگاه است که ممکن است بزرگی آن برای ایجاد خطر برق گرفتگی کافی باشد.

⚠ علامت تعجب در داخل یک مثلث متساوی الاضلاع به منظور هشدار به کاربر در مورد وجود دستورالعمل های مهم عملیاتی و نگهداری (سرویس) در دفترچه همراه دستگاه است.

## دستورالعمل های ایمنی مهم

تمام دستورالعمل های ایمنی و عملیاتی باید قبل از کار با دستگاه خوانده، رعایت و دنبال شوند. هنگام استفاده از یک وسیله برقی، اقدامات احتیاطی اساسی باید همیشه رعایت شود، از جمله موارد زیر:

### خطر – برای کاهش خطر برق گرفتگی:

1. همیشه بلافاصله پس از استفاده و قبل از تمیز کردن، این دستگاه را از پریز برق بکشید.
2. اگر دستگاه در آب افتاد، دست خود را برای گرفتن آن در آب نبرید. بلافاصله آن را از برق بکشید.
3. هنگام حمام کردن یا زیر دوش از آن استفاده نکنید.
4. دستگاه را در جایی قرار ندهید یا نگهداری نکنید که امکان افتادن یا کشیده شدن آن به داخل وان یا سینک وجود داشته باشد. آن را در آب یا مایعات دیگر نیندازید.



5. هرگز از سنجاق یا سایر بست‌های فلزی با این دستگاه استفاده نکنید.

6. پوشش دستگاه را قبل از هر بار استفاده به دقت بررسی کنید. اگر پوشش نشانه‌هایی از فرسودگی مانند ترک خوردگی، تاول زدن یا پاره شدن دارد، دستگاه را دور بیندازید.
7. خشک نگه دارید. در محیط خیس یا مرطوب استفاده نکنید.

## هشدار – برای کاهش خطر سوختگی، آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به افراد:

1. دستگاه نباید هرگز وقتی به برق متصل است بدون نظارت رها شود. زمانی که از آن استفاده نمی‌کنید و قبل از گذاشتن یا برداشتن قطعات، آن را از پریز بکشید.
2. زیر پتو یا بالش از دستگاه استفاده نکنید. گرمای بیش از حد ممکن است رخ دهد و باعث آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به افراد شود.
3. نظارت دقیق زمانی که این دستگاه توسط، روی، یا نزدیک کودکان، افراد ناتوان یا معلول استفاده می‌شود، ضروری است.
4. از این دستگاه فقط برای کاربرد مورد نظر آن که در این دفترچه توضیح داده شده است استفاده کنید. از لوازم جانبی که توسط سازنده توصیه نشده است استفاده نکنید.

5. هرگز اگر سیم یا دوشاخه این دستگاه آسیب دیده است، اگر به درستی کار نمی کند، اگر افتاده یا آسیب دیده، یا در آب افتاده است، از آن استفاده نکنید. سعی نکنید خودتان آن را تعمیر کنید. دستگاه را برای بررسی و تعمیر به مرکز خدمات بازگردانید.
  6. این دستگاه را با سیم برق آن حمل نکنید یا از سیم به عنوان دستگیره استفاده نکنید.
  7. هنگام نگهداری، دستگاه را له یا تا نکنید.
  8. سیم را از سطوح داغ دور نگه دارید.
  9. هرگز هیچ شیئی را در هیچ یک از منافذ دستگاه نیندازید یا وارد نکنید.
  10. در فضای باز استفاده نکنید. این دستگاه فقط برای استفاده خانگی و داخلی طراحی شده است.
  11. در جاهایی که محصولات آئروسول (اسپری) استفاده می شود یا اکسیژن تجویز می شود، از دستگاه استفاده نکنید.
  12. در حضور دودهای انفجاری و/یا قابل اشتعال از دستگاه استفاده نکنید.
  13. برای قطع اتصال، تمام کنترل ها را در وضعیت خاموش قرار دهید، سپس دوشاخه را از پریز خارج کنید.
  14. پریز برق را بیش از حد بارگذاری نکنید. فقط از منبع تغذیه همانطور که نشان داده شده است استفاده کنید.
  15. برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، دستگاه را باز نکنید یا سعی در تعمیر آن نکنید. تعمیر نادرست می تواند باعث خطر برق گرفتگی یا آسیب به افراد هنگام استفاده از دستگاه شود.
  16. هرگز دوشاخه را با کشیدن سیم برق از پریز خارج نکنید.
- این دستورالعمل ها را نگه دارید

## محل قطعات و کنترل ها

1. واحد اصلی

2. گوی های شیاتسو (ماساژ دهنده)

3. پنل کنترل



4. پاور (روشن / خاموش)

5. گرما

6. جهت چرخش

7. آداپتور برق

8. دوشاخه برق خودرو (فندکی)

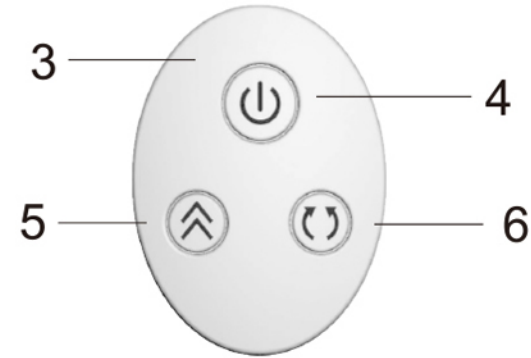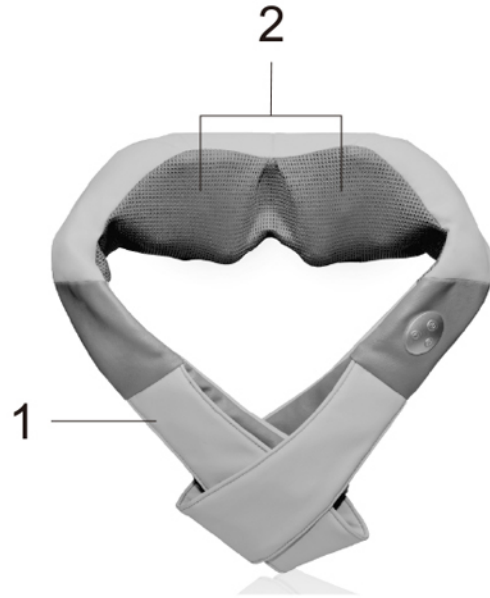

## استفاده از ماساژور

1. برای استفاده در منزل، آداپتور برق را به ماساژور متصل کنید. آداپتور را به پریز برق بزنید.
2. برای استفاده در خودرو، دوشاخه برق خودرو را به ماساژور متصل کنید. دوشاخه را در سوکت فنکی خودرو قرار دهید.
3. دستگیره‌های نگهدارنده را بگیرید و دستگاه را دور گردن خود بپیچید به طوری که گوی‌های ماساژ شیا‌تسو به راحتی روی شانه‌های بالایی شما قرار گیرند.
4. دکمه POWER را فشار دهید تا ماساژ روشن / خاموش شود.
5. دکمه HEAT را فشار دهید تا گرما روشن / خاموش شود.
6. دکمه DIRECTION را فشار دهید تا جهت چرخش گوی‌های ماساژ (ساعت گرد یا پادساعت گرد) تغییر کند.

### نکته:

- عملکرد ماساژ پس از 15 دقیقه به طور خودکار خاموش می‌شود.
- عملکرد گرما زمانی که ماساژ خاموش شود، به طور خودکار خاموش می‌شود.

### مراقبت و نگهداری محصول

1. ماساژور را در زمانی که استفاده نمی‌کنید در مکانی امن، خنک و خشک قرار دهید.
2. پس از کشیدن از برق، با یک پارچه نرم و مرطوب و با استفاده از پاک‌کننده‌های غیر ساینده (ملایم) تمیز کنید.
3. هرگز دستگاه را در هیچ مایعی فرو نبرید.
4. دور از تمام حلال‌ها و شوینده‌های قوی نگه دارید.
5. سعی نکنید این ماساژور را تعمیر کنید. هیچ قطعه قابل تعمیری توسط کاربر در آن وجود ندارد.

# مشخصات فنی

ولتاژ نامی: 12 ولت DC  
مصرف برق: 24 وات