

ماساژور دو کاره پا و کمر (2 در 1) MX-RF01



دستورالعمل های راه اندازی
قبل از استفاده دستورالعمل ها را مطالعه کنید.

1-4

هشدارها و احتیاطها:

5

محل قطعات و کنترلها:

5

استفاده از ماساژور:

6

مراقبت و نگهداری محصول:

هشدار

فقط برای استفاده بزرگسالان

مهم: هر فردی که ممکن است باردار باشد، دارای ضربان ساز قلب (باتری قلب) باشد، از دیابت، فلبیت (التهاب ورید) و/یا ترومبوز (لخته شدن خون) رنج می برد، در معرض خطر افزایش یافته ای برای ایجاد لخته خون است، یا دارای پین / پیچ / مفاصل مصنوعی یا سایر دستگاه های پزشکی کاشته شده در بدن خود می باشد، باید قبل از استفاده از دستگاه ماساژ خانگی با پزشک مشورت کند.

دماهای به اندازه کافی بالا برای ایجاد سوختگی ممکن است رخ دهد، صرف نظر از تنظیمات کنترل.

- روی نوزاد، فرد ناتوان، یا فردی که خواب یا بیهوش است استفاده نکنید.
- روی پوست بی حس یا روی شخصی با گردش خون ضعیف استفاده نکنید.
- پوست در تماس با ناحیه گرم شده دستگاه را مرتباً بررسی کنید تا خطر تاول زدن کاهش یابد.

احتیاط

- برای کاهش خطر برق گرفتگی، پوشش دستگاه را بردارید. هیچ قطعه قابل تعمیری در داخل وجود ندارد.
- برای کاهش خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

دستورالعمل های ایمنی مهم

تمام دستورالعمل های ایمنی و عملیاتی باید قبل از کار با دستگاه خوانده، رعایت و دنبال شوند. هنگام استفاده از یک وسیله برقی، اقدامات احتیاطی اساسی باید همیشه رعایت شود، از جمله موارد زیر:

خطر - برای کاهش خطر برق گرفتگی:


1. همیشه بلافاصله پس از استفاده و قبل از تمیز کردن، این دستگاه را از پریز برق بکشید.
2. اگر دستگاه در آب افتاد، دست خود را برای گرفتن آن در آب نبرید. بلافاصله آن را از برق بکشید.
3. هنگام حمام کردن یا زیر دوش از آن استفاده نکنید.
4. دستگاه را در جایی قرار ندهید یا نگهداری نکنید که امکان افتادن یا کشیده شدن آن به داخل وان یا سینک وجود داشته باشد. آن را در آب یا مایعات دیگر نیندازید.
5. هرگز از سنجاق یا سایر بست های فلزی با این دستگاه استفاده نکنید.
6. پوشش دستگاه را قبل از هر بار استفاده به دقت بررسی کنید. اگر پوشش نشانه هایی از فرسودگی مانند ترک خوردگی، تاول زدن یا پاره شدن دارد، دستگاه را دور بیندازید.
7. خشک نگه دارید. در محیط خیس یا مرطوب استفاده نکنید.
8. دستگاه دارای سطح گرم شونده است. افرادی که به گرما حساس نیستند باید هنگام استفاده از دستگاه مراقب باشند.

هشدار - برای کاهش خطر سوختگی، آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به افراد:

1. دستگاه نباید هرگز وقتی به برق متصل است بدون نظارت رها شود. زمانی که از آن استفاده نمی کنید یا شارژ تمام شده است، آن را از پریز بکشید.
2. زیر پتو یا بالش از دستگاه استفاده نکنید. گرمای بیش از حد ممکن است رخ دهد و باعث آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به افراد شود.
3. نظارت دقیق زمانی که این دستگاه توسط، روی، یا نزدیک کودکان، افراد ناتوان یا معلول استفاده می شود، ضروری است.




4. از این دستگاه فقط برای کاربرد مورد نظر آن که در این دفترچه توضیح داده شده است استفاده کنید. از لوازم جانبی که توسط سازنده توصیه نشده است استفاده نکنید.
 5. محصول را در معرض گرمای بیش از حد از سایر منابع حرارتی قرار ندهید.
 6. هرگز اگر سیم این دستگاه آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید. اگر به درستی کار نمی کند، اگر افتاده یا آسیب دیده، یا در آب افتاده است، سعی نکنید خودتان آن را تعمیر کنید. دستگاه را برای بررسی و تعمیر به مرکز خدمات بازگردانید.
 7. هنگام نگهداری، دستگاه را له یا تا نکنید.
 8. هرگز هیچ شیئی را در هیچ یک از منافذ دستگاه نیندازید یا وارد نکنید.
 9. این دستگاه برای استفاده داخلی در نظر گرفته شده است اما می توان از آن در فضای باز نیز استفاده کرد (با احتیاط).
 10. در جاهایی که محصولات آئروسول (اسپری) استفاده می شود یا اکسیژن تجویز می شود، از دستگاه استفاده نکنید.
 11. در حضور دودهای انفجاری و/یا قابل اشتعال از دستگاه استفاده نکنید.
 12. برای شارژ کردن دستگاه (یا اتصال به برق)، تمام کنترل ها را در وضعیت خاموش قرار دهید.
 13. برای شارژ دستگاه از آداپتور و کابل شارژ با کیفیت استفاده کنید. آداپتور باید استاندارد 5 ولت 2 آمپر باشد.
(نکته مترجم: در اینجا متن اصلی به اشتباه 5 ولت 2 آمپر ذکر کرده است، اما در جاهای دیگر دفترچه به وضوح 12 ولت 2 آمپر ذکر شده است. لطفاً به بخش استفاده از محصول توجه کنید).
 14. برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، دستگاه را باز نکنید یا سعی در تعمیر آن نکنید. تعمیر نادرست می تواند باعث خطر برق گرفتگی یا آسیب به افراد هنگام استفاده از دستگاه شود.
- این دستورالعمل ها را نگه دارید

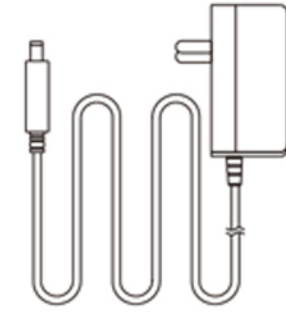

آداپتور برق

دکمه کنترل

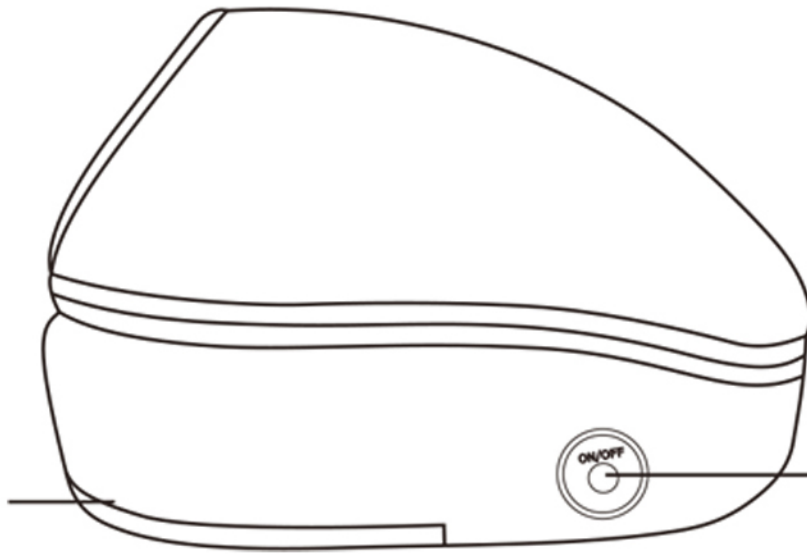

بدنه اصلی

استفاده از محصول

1. محصول را به آداپتور متصل کنید. مطمئن شوید که محکم وصل شده است.
2. آداپتور را به پریز برق بزنید.
3. ناحیه‌ای از بدن را که می‌خواهید ماساژ دهید انتخاب کنید. این ماساژور هم برای پا و هم برای کمر طراحی شده است. (زیپ را باز کنید تا پوشش رویی محصول را برای ماساژ بهتر کمر بردارید).
4. دکمه POWER را فشار دهید تا ماساژ شروع شود. عملکرد گرمایش نیز روشن خواهد شد.

5. دکمه POWER را دوباره فشار دهید تا جهت ماساژ تغییر کند. (جهت ماساژ به طور خودکار هر یک دقیقه عوض می شود).
 6. دکمه POWER را مجدداً فشار دهید تا عملکرد گرمایش خاموش شود.
 7. دکمه POWER را دوباره فشار دهید تا ماساژور خاموش شود.
- (این محصول دارای عملکرد خاموشی خودکار است که 15 دقیقه پس از روشن شدن، دستگاه را به طور خودکار خاموش می کند).
لطفاً فقط از آداپتور 12 ولت، 2 آمپر (DC12V, 2A) موجود در جعبه برای استفاده از محصول استفاده کنید.

مراقبت و نگهداری محصول



1. ماساژور را در زمانی که استفاده نمی کنید در مکانی امن، خنک و خشک قرار دهید.
2. پس از کشیدن از برق، بایک پارچه نرم و خشک تمیز کنید.
3. هرگز دستگاه را در هیچ مایعی فرو نبرید.
4. دور از تمام حلال ها و شوینده های قوی نگه دارید.
5. سعی نکنید این ماساژور را تعمیر کنید. هیچ قطعه قابل تعمیری توسط کاربر در آن وجود ندارد.



مشخصات فنی
ولتاژ: 12 ولت، 2 DC، آمپر
مصرف برق: 24 وات
تایمر: 15 دقیقه