

**BESTREST**

نیکان آسا  
پرشین



## ماساژور گردن و شانه سه بعدی شیاتسو



دفترچه راهنمای  
ماساژور گردن و شانه  
M X - R N 2 1 R

## فهرست مطالب

- |     |                         |
|-----|-------------------------|
| 1-4 | هشدارها و احتیاط‌ها:    |
| 5   | رابط کنترلی و شارژ:     |
| 6   | استفاده از ماساژور:     |
| 6   | مراقبت و نگهداری محصول: |

### هشدار

### فقط برای استفاده بزرگسالان

مهم: هر فردی که ممکن است باردار باشد، دارای ضربان ساز قلب (باتری قلب) باشد، از دیابت، فلبیت (التهاب ورید) و/یا ترومبوز (لخته شدن خون) رنج می‌برد، در معرض خطر افزایش یافته‌ای برای ایجاد لخته خون است، یا دارای پین/پیچ/مفاصل مصنوعی یا سایر دستگاه‌های پزشکی کاشته شده در بدن خود می‌باشد، باید قبل از استفاده از دستگاه ماساژ خانگی با پزشک مشورت کند.

دماهای به اندازه کافی بالا برای ایجاد سوختگی ممکن است رخ دهد، صرف نظر از تنظیمات کنترل.

کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی‌کنند. این دستگاه نباید توسط افرادی (شامل کودکان) با توانایی‌های جسمی یا ذهنی کاهش یافته، یا فاقد تجربه و دانش استفاده شود، مگر اینکه تحت نظارت باشند.

روی نوزاد، فرد ناتوان، یا فردی که خواب یا بیهوش است استفاده نکنید.

روی پوست بی‌حس یا روی شخصی با گردش خون ضعیف استفاده نکنید.

پوست در تماس با ناحیه گرم شده دستگاه را مرتباً بررسی کنید تا خطر تاول زدن کاهش یابد.

## احتیاط

- برای کاهش خطر برق گرفتگی، قاب دستگاه را بردارید. هیچ قطعه قابل تعمیر در داخل وجود ندارد.
- برای کاهش خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

## دستور العمل های ایمنی مهم

تمام دستور العمل های ایمنی و عملیاتی باید قبل از کار با دستگاه خوانده، رعایت و دنبال شوند. هنگام استفاده از یک وسیله برقی، اقدامات احتیاطی اساسی باید همیشه رعایت شود، از جمله موارد زیر:

### خطر - برای کاهش خطر برق گرفتگی:

1. اگر دستگاه در آب افتاد، دست خود را برای گرفتن آن در آب نبرید.
2. هنگام حمام کردن یا زیر دوش از آن استفاده نکنید.
3. دستگاه را در جایی قرار ندهید یا نگهداری نکنید که امکان افتادن یا کشیده شدن آن به داخل وان یا سینک وجود داشته باشد. آن را در آب یا مایعات دیگر نیندازید.
4. هرگز از سنجاق یا سایر بست های فلزی با این دستگاه استفاده نکنید.
5. پوشش دستگاه را قبل از هر بار استفاده به دقت بررسی کنید. اگر پوشش نشانه هایی از فرسودگی مانند پارگی ریز، تاول زدن یا ترک خوردگی دارد، دستگاه را دور بیندازید.
6. خشک نگه دارید. در محیط خیس یا مرطوب استفاده نکنید.
7. دستگاه دارای سطح گرم شونده است. افرادی که به گرما حساس نیستند باید هنگام استفاده از دستگاه مراقب باشند.


### هشدار - برای کاهش خطر سوختگی، آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به افراد:

1. دستگاه نباید هرگز وقتی به برق متصل است بدون نظارت رها شود. زمانی که از آن استفاده نمی کنید و قبل از گذاشتن یا برداشتن قطعات، آن را از پریز بکشید.
2. زیر پتو یا بالش از دستگاه استفاده نکنید. گرمای بیش از حد ممکن است رخ دهد و باعث آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به افراد شود.
3. نظارت دقیق زمانی که این دستگاه توسط، روی، یا نزدیک کودکان، افراد ناتوان یا معلول استفاده می شود، ضروری است.
4. از این دستگاه فقط برای کاربرد مورد نظر آن که در این دفترچه توضیح داده شده است استفاده کنید. از لوازم جانبی که توسط سازنده توصیه نشده است استفاده نکنید.

5. هرگز اگر سیم این دستگاه آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید. اگر به درستی کار نمی کند، اگر افتاده یا آسیب دیده، یا در آب افتاده است، سعی نکنید خودتان آن را تعمیر کنید. دستگاه را برای بررسی و تعمیر به مرکز خدمات بازگردانید.
6. این دستگاه را با سیم برق آن حمل نکنید یا از سیم به عنوان دستگیره استفاده نکنید.
7. هنگام نگهداری، دستگاه را له یا تا نکنید.
8. سیم را از سطوح داغ دور نگه دارید.
9. هرگز هیچ شیئی را در هیچ یک از منافذ دستگاه نیندازید یا وارد نکنید.
10. در فضای باز استفاده نکنید. این دستگاه فقط برای استفاده خانگی و داخلی طراحی شده است.
11. در جاهایی که محصولات آئروسول (اسپری) استفاده می شود یا اکسیژن تجویز می شود، از دستگاه استفاده نکنید.
12. در حضور دودهای انفجاری و/یا قابل اشتعال از دستگاه استفاده نکنید.
13. برای قطع اتصال، تمام کنترل ها را در وضعیت خاموش قرار دهید.
14. پریز برق را بیش از حد بارگذاری نکنید. فقط از منبع تغذیه همانطور که نشان داده شده است استفاده کنید.
15. برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، دستگاه را باز نکنید یا سعی در تعمیر آن نکنید. تعمیر نادرست می تواند باعث خطر برق گرفتگی یا آسیب به افراد هنگام استفاده از دستگاه شود.



**این دستورالعمل ها را نگه دارید**

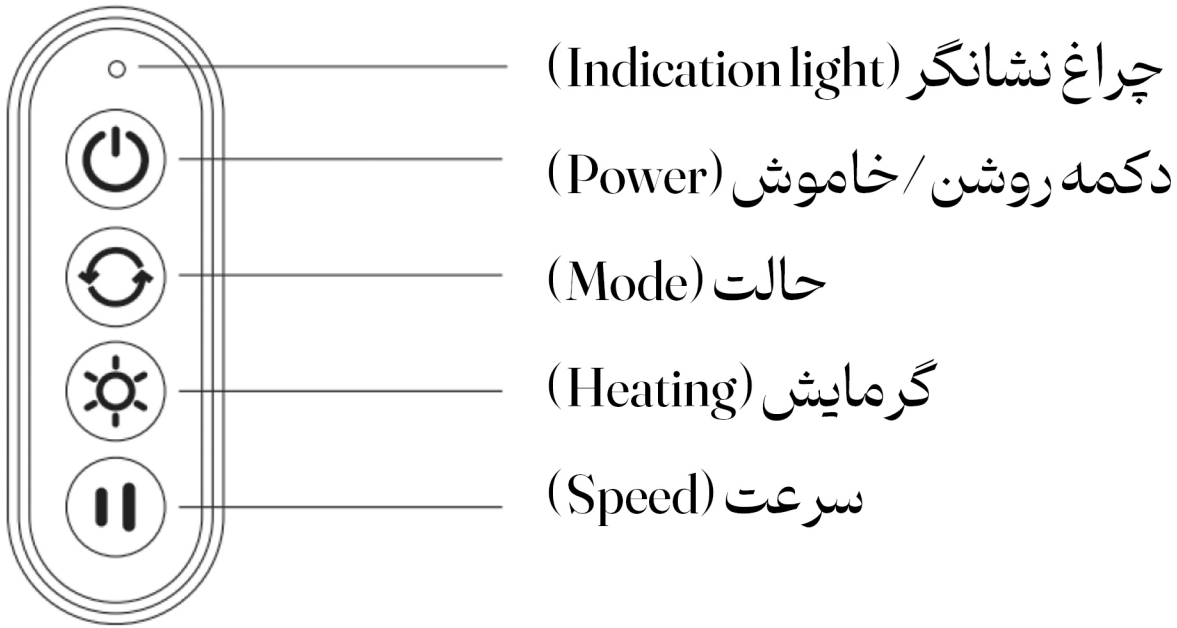

## شارژ

برای شارژ دستگاه فقط از شارژر USB با خروجی 5 ولت 2 آمپر استفاده کنید (شارژر داخل بسته بندی موجود نیست).

شارژ کامل دستگاه حدود 3.5 ساعت زمان می برد. در هنگام شارژ، دستگاه روشن نمی شود.

هنگام شارژ، چراغ نشانگر به صورت قرمز و ضربانی روشن است؛ پس از کامل شدن شارژ، چراغ سفید شده و چشمک می زند.

## استفاده از ماساژور

1. دکمه POWER را فشار دهید و نگه دارید تا ماساژ شروع شود. عملکرد گرمایش نیز روشن خواهد شد.
2. دکمه MODE را فشار دهید تا حالت‌های ماساژ تغییر کند - حالت مداوم / حالت با مکث کوتاه.
3. دکمه HEAT را فشار دهید تا سطح گرما انتخاب شود - زیاد / کم / خاموش. وقتی گرمایش خاموش شود، چراغ نشانگر از قرمز به سفید تغییر رنگ می‌دهد.
4. دکمه SPEED را فشار دهید تا سطح سرعت ماساژ تغییر کند - نرمال / سریع.
5. دکمه POWER را فشار دهید و نگه دارید تا ماساژور خاموش شود. عملکرد گرمایش نیز خاموش خواهد شد.

## مراقبت و نگهداری محصول

1. ماساژور را در زمانی که استفاده نمی‌کنید در مکانی امن، خنک و خشک قرار دهید.
2. پس از کشیدن از برق، با یک پارچه نرم و مرطوب و با استفاده از پاک‌کننده‌های غیر ساینده (ملایم) تمیز کنید.
3. هرگز دستگاه را در هیچ مایعی فرو نبرید.
4. دور از تمام حلال‌ها و شوینده‌های قوی نگه دارید.
5. سعی نکنید این ماساژور را تعمیر کنید. هیچ قطعه قابل تعمیری توسط کاربر در آن وجود ندارد.